



Инструкция по эксплуатации Автомат для мойки и дезинфекции лабораторной посуды PLW 8615/PLW 8616

До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите материальный ущерб.

ru-RU




.....	000
Указания по инструкции	6
Надлежащее использование	7
Пользовательские профили	8
Описание прибора	9
Внешний вид прибора	9
Сторона загрузки и выгрузки	9
Сторона загрузки и выгрузки без сервисной крышки	10
Сторона выгрузки (только PLW 8616)	11
Элементы управления на дисплее	12
Главное меню	12
Дисплей «Запуск программы»	14
Указания по безопасности и предупреждения	19
Символы на моечном автомате	24
Главное меню	26
Главное меню	26
Действия в Главное меню	26
Изменить язык текстовых сообщений 	27
Вход 	27
Выход	28
Напечатать документацию	28
Открывание и закрывание дверцы	29
PLW 8616	29
Особенности используемой техники	30
Общие указания	30
Транспортировочная тележка	30
Загрузочное устройство	30
Размещение обрабатываемого материала	32
Подготовить обрабатываемый материал	33
Перед запуском программы	35
После завершения программы	35
Лабораторная посуда и принадлежности	36
Обзор программ	37
Общая информация о программах	38
Программы для специфических загрязнений	39
Программы для специально обрабатываемого материала	40
Дополнительные программы	41
Сервисная программа	42
Химическая технология	43
Дозирование жидких химических средств	47
Дозирующие системы	47
Контейнеры для химических средств	48
Заполнение контейнеров химическими средствами	49
Заполнение дозирующей системы	50
Эксплуатация	51
Включение и выключение автомата для мойки	51

Содержание

Загрузка моечной камеры	51
Выбор программы	52
Выбор загрузочного устройства	52
Выбор программы из Персональных программ	53
Запуск программы	54
Выполнение программы	55
Завершение программы	55
Прервать программу	55
Прерывание программы с ручной дезинфекцией	56
Настройка времени отложенного запуска	57
Подключение к сети	58
Подключение к сети	58
Протоколы сети	59
Протоколирование параметров процесса	59
Системные настройки	60
Система	60
Сетевые подключения	60
Изменение PIN-кода	61
Выдача прав записи	62
Настройка принтера	63
Настройка сети	64
Функции машины	65
Автомат. системн. теста	65
Провести самодезинфекцию (опционально)	66
Запустить бесконечную программу	66
Заполнение дозирующей системы	67
Настройка системы дозирования	68
Регулировка модуля измерения проводимости	70
Выполнить проверку программы	71
Выполнение перезапуска	73
Вызов типовой таблички	73
Управление персональными программами	74
Содержание в исправности	75
Техобслуживание	75
Текущие проверки	76
Очистка фильтров в моечной камере	77
Очистка распылительных коромысел	78
Чистка автомата для мойки	80
Блокировка дисплея	80
Проверка тележек, модулей и вставок	82
Встроенный принтер (опция)	83
Замена рулона бумаги	83
Термобумага	84
Сообщения об ошибках и указания	85
Отображение ошибки на дисплее	85
в главном меню	85
во время выполнения программы	85

Технические неполадки автомата для мойки	86
Список с активными сообщениями	86
Устранение неисправностей.....	87
Технические неполадки без кода ошибок	88
Сервисная служба	89
Электроподключение	90
Электромагнитная совместимость (ЭМС).....	91
Подключение воды	92
Технические характеристики	93
Документы соответствия	93
Гарантийные обязательства	94
Условия транспортировки	94
Условия хранения	94
Условия гарантии.....	94
Срок службы прибора	96
Утилизация прибора	97
Приложение	100
Права пользователей в Главное меню.....	100
Права пользователей в меню Система	101
Уровни мощности программы/тележки/комбинации модулей	102
Опциональное оснащение прибора.....	105

Предупреждения

 Отмеченные таким значком указания содержат важную для техники безопасности информацию, предупреждающую об опасности получения травм персоналом и возможности материального ущерба.

Внимательно прочитайте предупреждения и соблюдайте приводимые в них требования по эксплуатации и правила поведения.

Указания

Указания содержат информацию, на которую следует обращать особое внимание.

Дополнительная информация и примечания

Дополнительная информация и примечания помечаются с помощью простой рамки.

Действия

Перед описанием каждого действия стоит значок в виде черного квадратика.

Пример:

■ Выберите опцию с помощью кнопок со стрелкой и сохраните установку с помощью *OK*.

Дисплей

Появляющаяся на дисплее информация отображается особым шрифтом, который имеет дисплейный вид.

Пример:

Меню *Установки* .

Автоматы для мойки и дезинфекции PLW 8615 и PLW 8616 предназначены для обработки лабораторной посуды, лабораторных принадлежностей и аналогичных компонентов с помощью водных сред.

Надлежащее использование

Обработка включает в себя мойку, ополаскивание, при необходимости термическую дезинфекцию и сушку для следующего обрабатываемого материала:

- сосуды, например, химические стаканы, бутылки, колбы и пробирки
- мерные сосуды, например, мерные колбы, мерные цилиндры, пипетки
- чашки, например, чашки Петри, часовые стёкла
- пластины, например, предметные стёкла и пластинки для секвенирования
- мелкие предметы, например, крышки, магнитные стержни-мешалки, шпатели и заглушки
- прочие предметы, например, боксы, пластиковые бутылки и сосуды, металлические части, трубки, шланги, воронки

В дальнейшем в настоящей инструкции автоматы для мойки и дезинфекции будут обозначаться просто как автоматы для мойки. Понятие «обрабатываемый материал» используется, если обрабатываемые предметы не определены точнее. Понятие «моющий раствор» используется для обозначения смеси из воды и химических средств.

Обработка осуществляется в сочетании с:

- химическими средствами процессов, подобранными в соответствии с требуемым результатом процесса обработки
- загрузочными устройствами, подобранными в соответствии с обрабатываемым материалом

Соблюдайте указания изготовителя обрабатываемого материала.

Ненадлежащее использование

Запрещается использовать автомат для мойки и дезинфекции PLW 8615 не по назначению, описанному здесь. В особенности это касается:

- обработки медицинских изделий, пригодных для обработки
- применения в сфере гастрономии
- применения в быту

Диспетчер пользователей

Доступ к автомату для мойки имеется только у ограниченного круга лиц. Авторизованные пользователи вносятся в веб-интерфейс автомата для мойки в Управление пользоват.. Управление пользоват. описывается в руководстве по программированию.

ID пользователя и PIN требуются для Login пользователя на автомате для мойки.

Действия пользователя сохраняются, например запуск программы обработки. Пользовательские данные выдаются на Протокол обработки.

Пользовательские профили

Повседневная работа

Для повседневной работы обслуживающий персонал должен быть допущен к простым функциям и загрузке автомата для мойки, а также должен регулярно проходить обучение. Персоналу потребуются базовые знания по машинной подготовке лабораторной посуды и лабораторных принадлежностей.

Повседневная работа осуществляется для следующих уровней пользователей:

- без регистрации
- Автоматика
- Оператор

Сервисные операции

Для настройки автомата для мойки, например, применительно к местным условиям, дополнительно требуются специальные знания о приборе.

Настройки осуществляются для следующих уровней пользователя:

- Инженерно-технические работники
- Администратор

Администрация


Изменение процесса обработки и эксплуатационные испытания требуют дополнительных особых знаний о машинной обработке лабораторной посуды и лабораторных принадлежностей, а также о технологических процессах.

Они осуществляются для следующего уровня пользователя:

- Администратор

Внешний вид прибора


Сторона загрузки и выгрузки

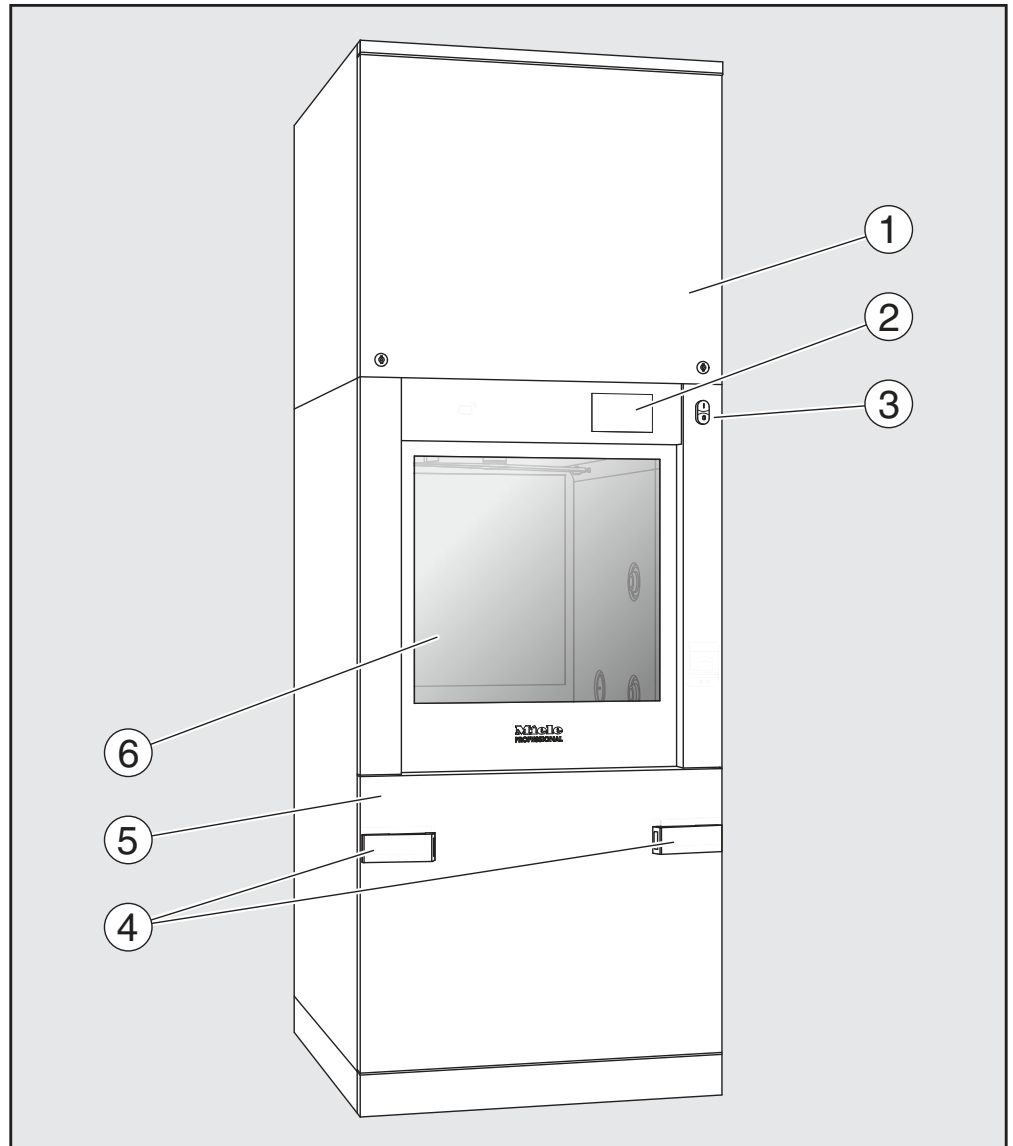

- ① Сервисная крышка для специалиста сервисной службы
- ② Дисплей
- ③ Главный выключатель I/O
- ④ Стыковочное приспособление для транспортировочной тележки, блокировка сервисной крышки
- ⑤ Сервисная крышка
- ⑥ Дверца закрыта


Описание прибора

Сторона загрузки и выгрузки без сервисной крышки

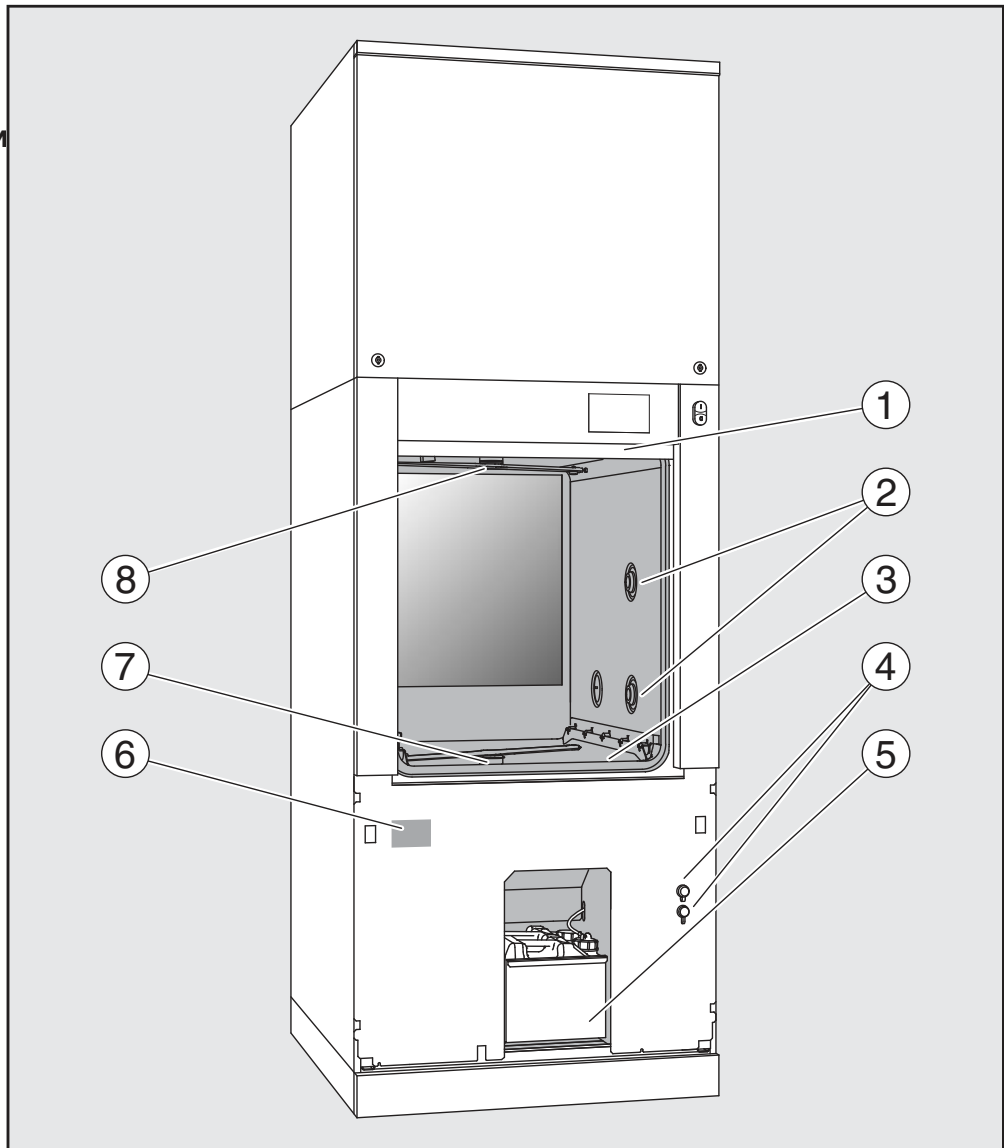

- ① Дверца открыта
- ② Устройства сопряжения для тележек
- ③ Комбинация фильтров
- ④ Подключения для специалиста сервисной службы
- ⑤ Выдвижной отсек с контейнерами и подсоединениями для химических средств
- ⑥ Типовая табличка
- ⑦ Нижнее распылительное коромысло машины
- ⑧ Верхнее распылительное коромысло машины

Сторона выгрузки
(только PLW 8616)

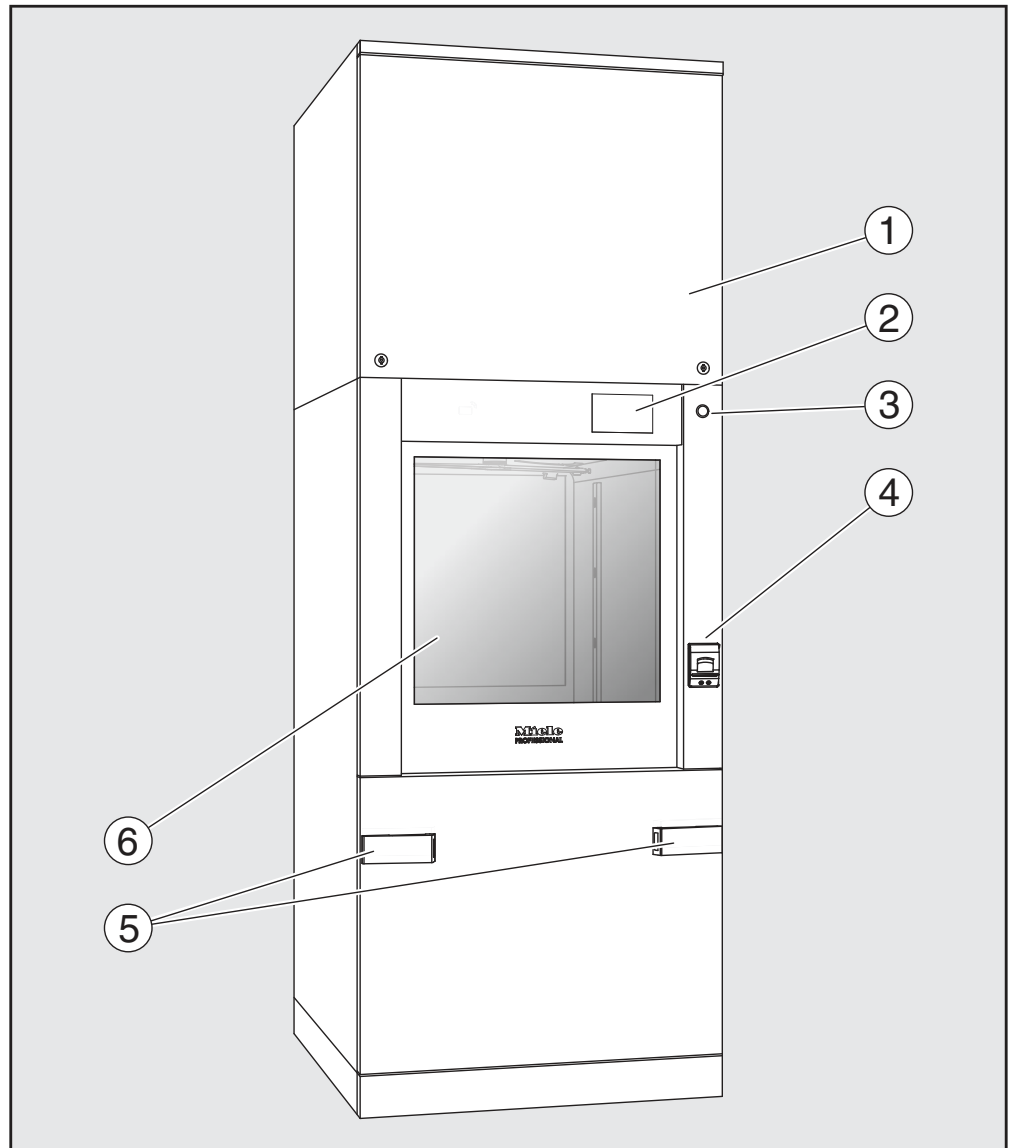


- ① Сервисная крышка для специалиста сервисной службы
- ② Дисплей
- ③ Главный выключатель 0
- ④ Встроенный принтер (опция)
- ⑤ Устройство для стыковки транспортировочной тележки
- ⑥ Дверца закрыта

Элементы управления на дисплее

Главное меню

Дисплей автомата для мойки отображает светлые элементы управления на чёрном фоне. В данной инструкции по эксплуатации для лучшей читаемости дисплей показан чёрным цветом на светлом фоне.

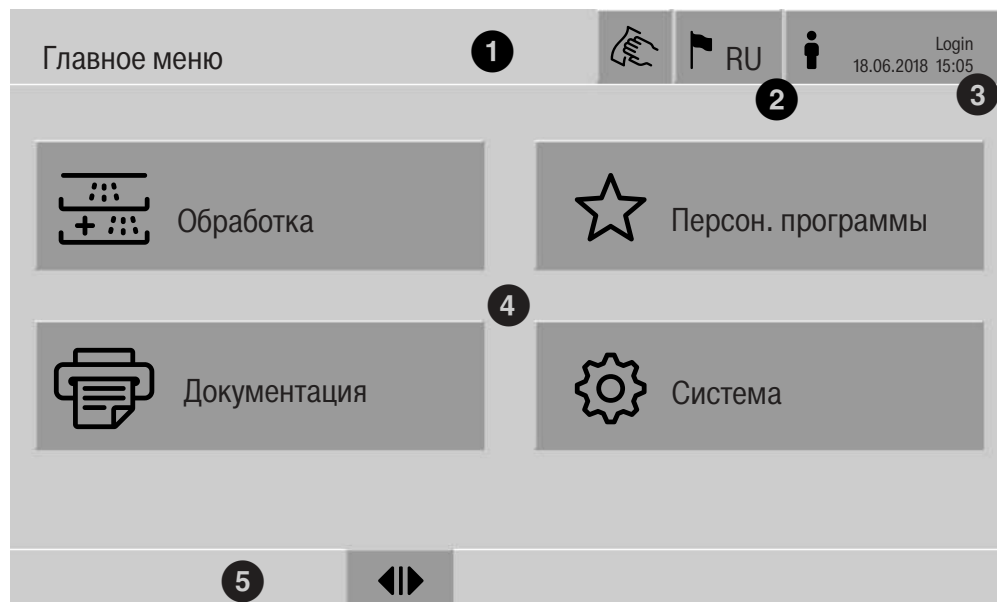

- ① Верхняя строка
- ② Установленный язык текстовых сообщений на дисплее
- ③ Зарегистрированный пользователь
- ④ Кнопки для вызова подменю
- ⑤ Нижняя строка

В нижней строке отображаются кнопки для всех разрешённых действий.





Если меню разделено на несколько страниц, в нижней строке отображается полоса прокрутки. Для перелистывания страниц проведите пальцем по дисплею или нажмите на полосу прокрутки.

Кнопки в главном меню/ верхней строке






Символ	Описание/функция кнопки
	блокирует дисплей, например, для дезинфекции протиранием
	открывает меню Выбрать язык дисплея, за символом отображается текущий язык, например RU
	открывает диалоговое окно для входа или выхода, например, для смены пользователя

Описание прибора


Символы в главном меню

Символ	Описание/функция кнопки
 Обработка	открывает список программ обработки, которые присвоены загрузочным устройствам
☆ Персон. программы	открывает выбор персональных программ
 Документация	открывает список имеющихся протоколов обработки
 Система	открывает меню конфигурации, например, для заводских настроек или изменения PIN-кода
i	Информация
	подождите, система управления занята другим процессом

Кнопки в главном меню/
нижней строке

Символ	Описание/функция кнопки
	имеется предупреждение, открывает список Сообщения
	имеется ошибка, открывает список Сообщения
	открывает дверцу
	закрывает дверцу
	дверца заблокирована


Кнопки в подменю/
нижней строке

Символ	Описание/функция кнопки
	выйти из меню, вернуться к предыдущему уровню меню, не сохранять введённые данные
OK	подтвердить введённые данные

Описание прибора

Дисплей «Запуск программы»

После того как в меню Обработка будет выбрано загрузочное устройство А 500 и будет подтверждена соответствующая программа обработки Универсальная, отобразится следующий дисплей:

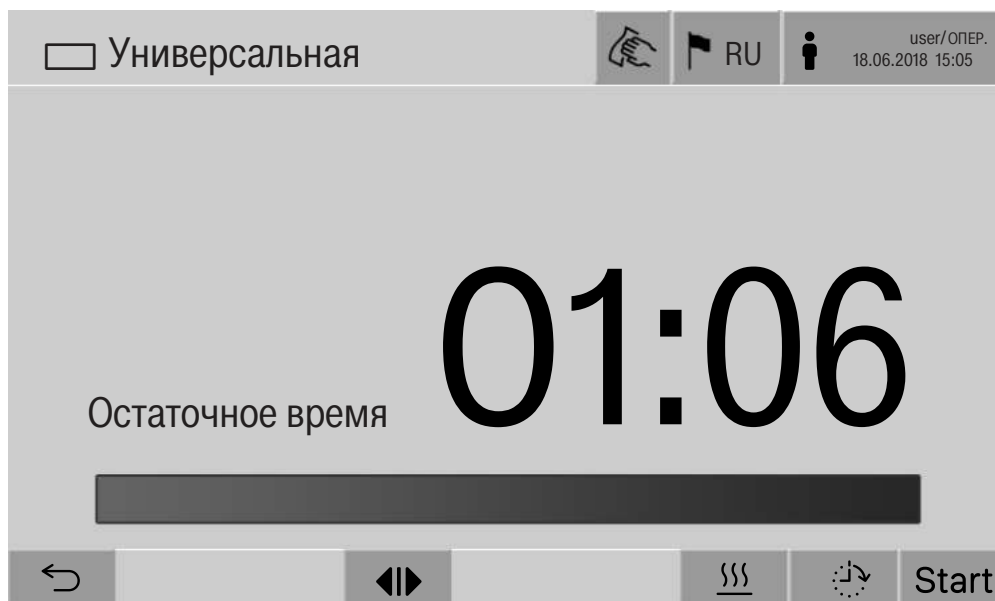




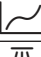

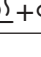
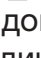
В верхней строке отображается пиктограмма загрузочного устройства и выбранная программа обработки.

На дисплее отображаются продолжительность работы и индикатор прогресса.

Цвет индикатора прогресса соответствует актуальному статусу машины:

- чёрный – готовность к работе
- белый – текущая программа обработки
- зелёный – успешно завершённая программа обработки
- жёлтый – предупреждения
- красный – ошибки

Кнопки/символы
«Запуск программы/ход программы»

Символ	Описание/функция кнопки
Start	запуск программы
Stop	прерывание программы
	открыть окно ввода для предварительной установки времени запуска
	дверца заблокирована
	показать индикацию выполнения программы в стандартном виде
вход/выход	схематическая индикация хода программы, содержит информацию для сервисной службы
	показать выполнение программы в виде диаграммы
	выбор вида нагрева: пар
	выбор вида нагрева: электричество
	выбор вида нагрева: электричество и пар
— (рядом с индикатором прогресса)	с кнопкой на индикаторе прогресса отображаются текущие ошибки и предупреждения

Контекстное меню Нагрев (опция)

Это контекстное меню предлагается только в автоматах для мойки, для которых возможно переключение электропитания с «Электричество» на «Пар».

Перед программой и во время выполнения программы можно изменить источник электроэнергии для нагрева. Выбранная настройка используется для нагрева моющего раствора и обессоленной воды в баке для обессоленной воды.

Выбранная установка сохраняется в системе управления машины.




Касание кнопки  открывает контекстное меню.

Описание прибора

Пример индикации выполнения программы

После запуска программы её ход отображается на следующем дисплее:

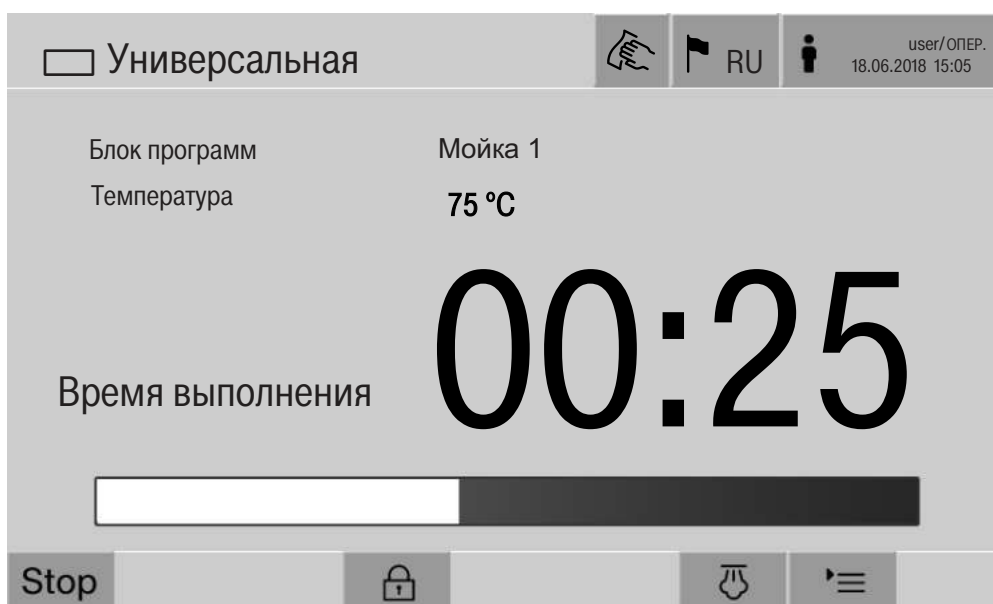



Кроме того, на дисплее отображается текущий блок программы и достигнутая температура.

Индикатор прогресса показывает соотношение времени работы к оставшемуся времени.

Контекстное меню «Индикация выполнения программы»


Во время выполнения программы можно выбрать один из 4 вариантов индикации:

- стандартно '≡
- в виде таблицы 
- табло входа/выхода Вход/выход
- в графической форме 



Касание кнопки '≡ открывает контекстное меню.

Индикация выполнения программы в виде таблицы

После перехода на табличное отображение программы нажатием кнопки  на дисплее отображаются следующие данные:

- Название блока
- остаточное время работы блока программы
- Время выдержки
- Параметры программы с соответствующими заданными и фактическими значениями и минимальными и максимальными достигнутыми значениями


С помощью полосы прокрутки можно перейти на другие страницы.

Максимально возможные программные параметры:

- Материальный номер и Дата производства тележки
- Номер цикла
- пользовательская информация: Имя, Фамилия, Уровень пользователя
- температура моющего раствора, измеренные значения датчиков 1 и 2
- температура в фазах дозирования 1–3, измеренные значения датчиков 1 и 2
- температура воздуха во время сушки внутри в фазах 1 и 2
- температура воздуха во время сушки снаружи в фазах 1 и 2
- количество воды на этапе программы и в программном блоке
- дозируемое количество вещества с помощью используемых систем дозирования
- Значение A0
- Электропроводимость в заливе и сливе воды
- давление промывки для внутреннего контура мойки и PowerPulseCleaning
- частота вращения распылительного коромысла

Описание прибора

Индикация выполнения программы в виде графика

После перехода на графическое отображение программы нажатием кнопки  на дисплее следующие данные отображаются в виде кривых:


- температура моющего раствора [Вт]
- температура воздуха/сушка снаружи [LA]
- температура воздуха/сушка внутри [LI]
- давление мойки внутри [D]

Индикация выполнения программы в табло входа/выхода

Табло входа/выхода Вход/выход содержит информацию о сигналах входа (страница 1), сигналах выхода (страница 2) и отдельных значениях сенсора:

- температура моющего раствора
- температура воздуха
- давление мойки в циркуляционном насосе
- электропроводимость

Эта информация используется сервисной службой и не приводится в данной инструкции по эксплуатации.

 Вред здоровью и повреждения вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации.
Несоблюдение инструкций по эксплуатации, прежде всего содержащихся в них правил техники безопасности и предупреждений, может привести к серьёзным травмам или материальному ущербу.
Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать этот автомат для мойки. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения вашего автомата.
Бережно храните инструкции по эксплуатации.

Надлежащее использование

- ▶ Автомат для мойки допущен исключительно для областей применения, перечисленных в инструкции по эксплуатации. Использование автомата в любых других целях, внесение изменений в его конструкцию недопустимо и может оказаться опасным. Способы мойки и дезинфекции разработаны исключительно для обработки лабораторной посуды из стекла и принадлежностей, возможность повторного использования которых декларирована их изготовителем. Обратите внимание на указания изготовителя обрабатываемого материала.
- ▶ Автомат для мойки предназначен для эксплуатации исключительно во внутренних помещениях.
- ▶ В связи с особыми требованиями (например, в отношении температуры, влажности, стойкости к химическим реагентам, износоустойчивости и вибрации) моечный автомат оснащён специальным осветительным элементом (в зависимости от модели). Этот осветительный элемент должен использоваться только по назначению. Он не подходит для освещения помещений. Его замену может проводить только сервисная служба Miele.

Опасности получения травмы

Для того, чтобы избежать опасности получения травмы, обратите внимание на следующие указания!

- ▶ Прибор должен быть введен в эксплуатацию и в дальнейшем обслуживаться и ремонтироваться только сервисной службой Miele или соответствующей аттестованной организацией. Для наилучшего следования принципам надлежащей лабораторной практики (GLP) рекомендуется заключение договора с Miele на текущий ремонт и техническое обслуживание. Вследствие неправильно выполненных ремонтных работ может возникнуть серьезная опасность для пользователей!
- ▶ Автомат для мойки запрещается устанавливать во взрывоопасных и промерзающих помещениях.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Электробезопасность автомата для мойки гарантирована только в том случае, если он подключён к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, а в случае сомнения поручить специалисту-электрику проверить электропроводку распределительного щита, где устанавливается автомат.
- ▶ Неисправный и негерметичный прибор может представлять угрозу Вашей безопасности. Прибор в этом случае следует сразу вывести из эксплуатации и обратиться в сервисный центр Miele.
- ▶ Маркируйте выведенные из эксплуатации автоматы для мойки и защитите их от несанкционированного включения. Автомат для мойки можно повторно вводить в эксплуатацию только после успешного техобслуживания силами сервисной службы Miele.
- ▶ Обслуживающий персонал должен проходить регулярный инструктаж. Не прошедшему инструктаж персоналу обслуживание автомата для мойки запрещается.
- ▶ Следует соблюдать осторожность при обращении с химическими вспомогательными средствами! Речь идет при этом, в частности, о едких, раздражающих и токсичных веществах. Обратите внимание на действующие предписания по технике безопасности, а также на информацию, которую приводит производитель химических средств в паспорте безопасности! Используйте защитные очки и перчатки!
- ▶ Автомат для мойки рассчитан только на эксплуатацию с использованием воды и рекомендуемых химических средств. Нельзя эксплуатировать прибор с использованием органических растворителей или легко воспламеняющихся жидкостей. Существует опасность взрыва и опасность повреждения имущества вследствие разрушения резиновых и пластмассовых деталей и связанного с этим вытекания жидкостей.
- ▶ Вода в моечной камере не является питьевой!
- ▶ При вертикальном размещении острых и остроконечных предметов учитывайте опасность получения травмы и размещайте их таким образом, чтобы они не могли нанести травму.
- ▶ Стекланный бой может привести к опасным травмам при загрузке и разгрузке. Повреждённый материал из стекла не следует мыть в моечном автомате.
- ▶ В режиме использования автомата для мойки при высокой температуре постоянно контролируйте ее значение. При попытке открывания дверцы прибора в обход действующей блокировки замка существует опасность получить ожог, ошпариться и травмироваться, а при использовании дезинфекционного средства есть опасность вдыхания токсичного пара!

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Если при обработке в моющем растворе образуются или выделяются летучие токсичные вещества (например альдегиды в дезинфицирующем средстве), необходимо регулярно проверять уплотнение дверцы и при необходимости работоспособность пароконденсатора.
Открытие дверцы автомата для мойки во время прерывания программы в этом случае сопряжено с определённым риском.
- ▶ В крайнем случае, при контакте с токсичными парами или химическими вспомогательными средствами принимайте во внимание сведения, приводимые в паспортах безопасности изготовителей химических средств!
- ▶ После сушки с применением сушильного агрегата сначала только откройте дверцу, чтобы тележки, модули и вставки могли охладиться.
- ▶ Тележки, модули, вставки и загруженные предметы должны сначала остыть. После чего, при необходимости, удаляются остатки воды из полостей в рабочей камере.
- ▶ Паровой обогрев допускается с давлением до 1000 кПа. Это соответствует температуре кипения 180 °С для воды.
- ▶ Моечный автомат и зону, непосредственно прилегающую к нему, запрещается мыть струей воды из шланга или паром под высоким давлением.
- ▶ Перед началом проведения технического обслуживания следует отсоединить моечный автомат от сети электропитания.

Обеспечение качества

Обратите внимание на нижеследующие указания, чтобы гарантировать хорошее качество при обработке лабораторного стекла и принадлежностей, исключив опасность для пациентов и материальный ущерб!

- ▶ Прерывание программы может осуществлять уполномоченный на это персонал и только в исключительных случаях. При этом должно быть обеспечено соблюдение стандарта дезинфекции, термических, а также термохимических технологий (из списка, в соответствии с § 18 Закона о защите от инфекционных болезней (IFSG) в общепринятом порядке посредством соответствующих проверок.
- ▶ При выполнении обычных повседневных работ стандарт технологического процесса обеспечивает пользователь. Способы обработки следует проверять регулярно контролем результатов с последующим занесением их в протокол проверки.
- ▶ Для термической дезинфекции должны применяться температуры и время воздействия, которые, согласно нормам и директивам, а также микробиологическим и гигиеническим стандартам обеспечивают требуемую профилактику инфекций.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Следует обрабатывать только пригодные для машинной мойки предметы. При наличии деталей из пластмассы следует обращать внимание на их термостойкость. Никелированные предметы и предметы из алюминия подходят для машинной обработки лишь условно: для их обработки требуются особые условия технологического процесса.
Материалы из железа, подверженные коррозии, не должны попадать в моечную камеру ни в качестве обрабатываемого материала, ни в качестве загрязнений.
- ▶ Химические вспомогательные средства при определенных условиях могут привести к повреждениям в приборе. Настоятельно рекомендуется следовать рекомендациям изготовителей химических вспомогательных средств.
В случае повреждений и при подозрении на несовместимость материалов обращайтесь в техническую службу Miele.
- ▶ Моющие средства, содержащие хлор, могут повреждать эластомеры моечного автомата.
Если необходимо дозирование моющих средств, содержащих хлор, то для этапов обработки «Очистка» рекомендуется максимальная температура 75 °C (см. «Обзор программ»).
В моечных автоматах, устойчивых к масляным и жировым загрязнениям благодаря специальным маслостойким эластомерам (вариант с завода), моющие средства, содержащие хлор, использоваться не должны!
- ▶ Предварительная обработка (например, с помощью чистящих или дезинфицирующих средств), определенные загрязнения, а также химические вспомогательные средства, в результате химических взаимодействий могут стать причиной пенообразования. Пена может существенно снизить результат мойки и дезинфекции.
- ▶ Метод обработки должен быть настроен таким образом, чтобы пена не выходила из моечной камеры. Выходящая пена угрожает безопасной эксплуатации автомата для мойки.
- ▶ Для выявления пенообразования процесс обработки должен постоянно контролироваться.
- ▶ Во избежание повреждения автомата для мойки и используемых принадлежностей от воздействия химических средств процессов, загрязнений и их взаимодействия необходимо соблюдать указания в главе «Химическая технология».

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Рекомендация по применению химических средств процессов, например моющих средств, не означает, что изготовитель автомата для мойки несет ответственность за результат воздействия химического средства на материалы, из которых изготовлены обрабатываемые предметы.
Учтите, что изменения формул, условий хранения и т. д., о которых не сообщал производитель химических средств процессов, могут ухудшить качество результата чистки.
- ▶ При использовании химических средств процессов, пожалуйста, обязательно учитывайте указания производителя средств. Применяйте химические средства процессов только в соответствии с назначением, указываемым производителем, во избежание материального ущерба и, возможно, сильных химических реакций, например образования гремучего газа.
- ▶ Указания по хранению и утилизации химических средств, которые следует принимать во внимание, приводятся соответствующими изготовителями средств.
- ▶ Частицы ≥ 200 μm отсеиваются фильтром в моечной камере. Более мелкие частицы могут попасть в систему циркуляции.
- ▶ При особых применениях прибора, когда существуют особенно высокие требования к качеству выполнения работы, условия процесса (химические средства, качество воды и т.п.) должны быть предварительно согласованы со специалистами Miele.
- ▶ Если к результату мойки и ополаскивания предъявляются особенно высокие требования, например, в химической аналитике, пользователь должен осуществлять регулярный контроль качества для обеспечения необходимого стандарта обработки.
- ▶ Тележки, модули и вставки для размещения обрабатываемого материала следует использовать только по назначению. Внутренние полости у обрабатываемого материала, если таковые имеются, должны полностью промываться моющим раствором.
- ▶ Легкий обрабатываемый материал и мелкие предметы предохраняйте защитной сеткой или кладите в специальный сетчатый поддон для мелких предметов, чтобы они не блокировали распылительные коромысла.
- ▶ Сосуды, в которых имеются остатки жидкостей, перед размещением в приборе должны быть опорожнены.
- ▶ С предназначенными для мытья предметами в рабочую камеру не должны попадать остатки растворителей.
На предметах могут содержаться лишь следы растворителя с температурой возгорания ниже 21 °C.
- ▶ В автомат для мойки не должны попадать растворы, содержащие хлор, особенно остатки соляной кислоты!


Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Следите за тем, чтобы на внешнее, стальное обрамление прибора не попадали растворы/пары, содержащие хлориды и соляную кислоту, во избежание появления повреждений из-за коррозии.
- ▶ После работ с системой водоснабжения необходимо удалить воздух из водопровода, подсоединенного к моечному автомату. В ином случае возможно повреждение элементов моечного автомата.
- ▶ Обратите внимание на указания по монтажу, приводимые в прилагаемой инструкции по эксплуатации и монтажу.


Использование компонентов и принадлежностей

- ▶ Дополнительные принадлежности Miele разрешается подключать только в соответствии с их назначением. Тип и обозначение принадлежностей Вам назовут специалисты Miele.
- ▶ Разрешается использовать тележки, модули и вставки только фирмы Miele. При изменении принадлежностей Miele или применении других тележек и вставок Miele не может гарантировать, что будет достигнут достаточный результат мытья и дезинфекции. На повреждения, возникшие в результате таких замен, гарантия Miele не распространяется.
- ▶ Можно использовать только те химические средства процессов, которые разрешены изготовителем для соответствующей области применения. Изготовитель химических средств несёт ответственность за отрицательные воздействия на материал загрузки и на автомат для мойки.

Символы на моечном автомате

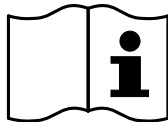

Внимание:
Соблюдайте указания инструкции по эксплуатации!

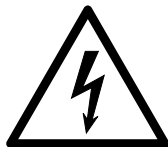

Внимание:
Опасность поражения электрическим током!



Осторожно, горячие поверхности:
При открывании дверцы в моечной камере может быть очень горячо!

Утилизация прибора

► Просьба обратить внимание на то, что отслуживший автомат для мойки после применения может быть загрязнён кровью и прочими биологическими жидкостями, патогенными микроорганизмами, генномодифицированным материалом и прочим, поэтому перед утилизацией его необходимо очистить.


По причине безопасности и защиты окружающей среды утилизируйте все остатки химических средств процессов с учётом мер безопасности и информации от производителя (использовать защитные очки и перчатки!).

Снимите или заблокируйте дверцу, чтобы дети не могли закрыться в автомате. После этого автомат можно считать подготовленным к утилизации.

В приборах с системой баков сначала необходимо удалить воду из бака.

► Перед утилизацией необходимо удалить все персональные данные, сохранённые в приборе, например имена пользователей.

Главное меню

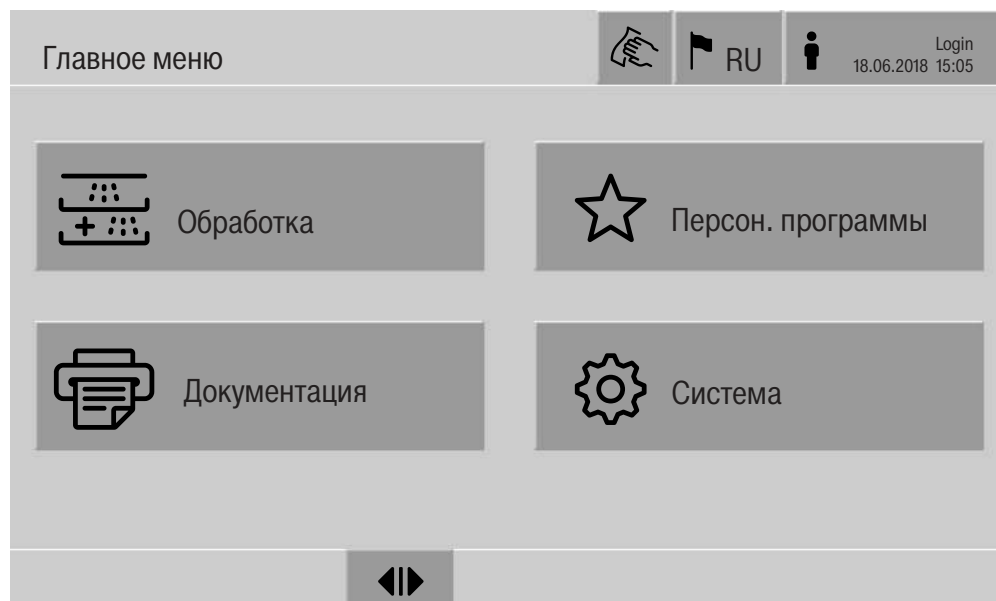

Действия в Главное меню

Главное меню автомата для мойки поделено на верхнюю и нижнюю строки, а также на 4 меню. С помощью кнопок можно выполнить следующие действия:

- заблокировать дисплей, например, для дезинфекции протиранием (см. главу «Мероприятия по техническому обслуживанию, блокировка автомата для мойки»)
- переключать язык текстовых сообщений
- регистрировать и удалять пользователя
- закрывать всплывающие окна с сообщениями в зависимости от уровня пользователя и вида сообщения, предупреждения или сообщения об ошибке (см. главу «Сообщения об ошибках и указания»)
- открыть список с активными сообщениями (см. главу «Сообщения об ошибках и указания»)
- выбрать и запустить программу обработки в зависимости от настроек в меню Управл. программами в веб-интерфейсе (см. главу «Эксплуатация»)
- вызвать и запустить программы обработки, созданных как Персон. программы, в зависимости от настроек в меню Система, Управл. персональн. программами (см. главу «Эксплуатация»)
- печать Протоколы обработки
- открыть меню Система для изменения настроек автомата для мойки в зависимости от Уровень пользователя (см. главу «Настройки системы»)
- открыть и закрыть загрузочную дверцу

- открыть и закрыть разгрузочную дверцу после завершения программы в зависимости от настройки «Подтверждение оконч. программы» в веб-интерфейсе

Изменить язык текстовых сообщений

Изменение языка текстовых сообщений не влияет на установленный системный язык. Протокол и печатные данные будут выдаваться на языке системы.




- Нажмите кнопку  в верхней строке дисплея.

Отобразится меню **Выбрать язык дисплея**.

- Нажмите кнопку требуемого языка.

Система управления автомата для мойки вернётся к предыдущему меню, будет установлен выбранный язык.


После нажатия кнопки  можно выйти из режима выбора языков без сохранения установленного языка.

Вход

Доступ к дисплею автомата для мойки имеется только у ограниченного круга пользователей. Каждый пользователь должен быть зарегистрирован в **Управление пользоват.** в веб-интерфейсе (см. руководство по программированию, главу «Диспетчер пользователей»).

вход вручную



- Нажмите кнопку  в верхней строке, чтобы открыть окно для входа пользователя.
- Введите ID пользователя и нажмите **ОК** для подтверждения.
- Введите PIN-код и подтвердите нажатием **ОК**.

Функции на дисплее автомата для мойки будут разблокированы.

Если пользователь входит в систему впервые, отобразится запрос на ввод нового PIN-кода.
Если срок действия PIN-кода истёк, отобразится запрос на ввод для пользователя. Срок действия PIN-кода устанавливается в веб-интерфейсе в «Система, Идентификация».

Главное меню


Выход

Зарегистрированный пользователь автоматически выходит из системы, если в течение 24 часов на дисплее не была нажата ни одна кнопка или был выполнен автоматический перезапуск. Автоматический перезапуск настраивается в веб-интерфейсе в «Система, Автомат. перезапуск».

выход вручную

Зарегистрированный пользователь может выйти из системы вручную, например, чтобы защитить автомат для мойки от несанкционированного доступа.



- Нажмите кнопку  в верхней строке дисплея, чтобы выйти из системы.
- Подтвердите запрос безопасности с помощью Да.

Функции на дисплее автомата для мойки будут заблокированы.

Напечатать документацию

На дисплее отображаются 200 последних протоколов обработки, сохранённых в системе управления машины. Самый последний протокол обработки находится на первом месте списка. Когда количество сохранённых протоколов превысит 200, самый старый протокол будет удалён из списка.

Если к автомату для мойки не подключено внешнее программное обеспечение для документации процесса, то протоколы обработки можно распечатывать на внешнем принтере, подключённом к сети.

- Нажмите кнопку  Документация.

На дисплее отобразится список с протоколами обработки.





- Нажмите кнопку в столбце Печатать, чтобы активировать необходимый протокол обработки.
- Нажмите кнопку **OK** в нижней строке, чтобы запустить печать.
- Снова нажмите кнопку в столбце Печатать для отмены выбора.

Протокол обработки распечатывается на внешнем принтере.

Открывание и закрывание дверцы

Статус дверцы автомата для мойки отображается в нижней строке дисплея.



-  Дверь разблокирована, её можно открыть.
-  Дверца открыта и может быть закрыта.
-  Дверца заблокирована.
- Нажмите кнопку с символом  для открытия дверцы.

Дверца перемещается вверх.

- Нажмите кнопку с символом  для закрытия дверцы.

Дверца перемещается вниз.

PLW 8616

Автомат для мойки PLW 8616 серийно оснащён 2 дверцами. В нижней строке дисплея отображаются обе дверцы рядом друг с другом. Слева отображается статус дверцы на рабочей стороне, справа – статус дверцы на противоположной стороне.



Автомат для мойки оснащён электронной блокировкой дверец. Открытой может быть только одна дверца. Деблокировка дверцы зависит от статуса машины.

Особенности используемой техники

Общие указания

Транспортировочная тележка

Для перевозки загрузочных тележек от зоны подготовки к автомату для мойки, а от него – к контрольно-упаковочному столу необходима транспортировочная тележка ТТ 86.

Чтобы использовать транспортировочную тележку типа MF 27/28-1 автомат для мойки должен быть оснащён комплектом для переоборудования RFMF 27/28.

К транспортировочным тележкам прилагаются отдельные инструкции по эксплуатации.

Запрещается использовать транспортировочные тележки типа MF-1.

Загрузочное устройство

Автомат для мойки можно оснастить различными загрузочными устройствами, которые можно комбинировать с различными модулями и вставками в зависимости от вида и формы обрабатываемого материала.

Загрузочные устройства и другие дополнения, например моющие средства, необходимо выбирать в соответствии с задачами.

Указания по отдельным сферам применения приводятся на следующих страницах и в инструкциях по эксплуатации загрузочных устройств.

Для всех сфер применения, указанных в главе «Надлежащее использование», Miele предлагает подходящие загрузочные устройства в форме тележек, модулей, вставок и специальных промывочных устройств. Информацию об этом можно получить в компании Miele.

Загрузочные устройства серии E 9xx

Загрузочные устройства с обозначением E 9xx можно использовать в автоматах для мойки, если они были изготовлены начиная с 2007 года.

Для тележек Miele предлагает комплекты дооснащения A 857.

Пиктограммы для выбора программы вручную

При выборе программ на автомате для мойки вручную сначала необходимо выбрать используемую тележку. Для этого на дисплее выводятся пиктограммы тележек. Пиктограммы, присвоенные тележкам серии А 5xx, перечислены в инструкциях по эксплуатации тележек.

Комбинации тележек/модулей серии А 5xx

Пиктограмма и имя тележки находятся на стойке с передней стороны тележки. Показана тележка без установленных модулей. Для разных комбинаций модулей в тележках А 500 и А 503 может быть показано несколько пиктограмм (см. инструкции по эксплуатации тележек).


Зафиксируйте тележки серии А 5xx

Пиктограмма и имя тележки находятся с передней стороны тележки.

Особенности используемой техники

Размещение обрабатываемого материала

Обрабатывайте только тот материал, который декларируется изготовителем в качестве пригодного для машинной обработки, и учитывайте особые указания по обработке материала.

 Опасность для здоровья вследствие работы с заражённым обрабатываемым материалом.

От заражённого обрабатываемого материала могут исходить разные опасности для здоровья, которые, в зависимости от заражения могут привести к инфекциям, отравлениям или травмам.

При работе с заражённым обрабатываемым материалом примите все необходимые меры по защите персонала.

Например, используйте защитные перчатки и подходящие вспомогательные средства.

- Важно располагать обрабатываемый материал таким образом, чтобы все поверхности могли омываться раствором. Только в этом случае материал сможет стать чистым!
- Обрабатываемые предметы не должны быть уложены вплотную и взаимно перекрываться.
- Обрабатываемые предметы не должны быть уложены настолько близко друг к другу, чтобы это мешало мойке!
- Обрабатываемый материал с полостями должен полностью промываться струёй моющего раствора изнутри. Для этого, в зависимости от обрабатываемого материала, требуются специальные моющие приспособления, например форсунки, сопла или адаптеры.
- При обработке материала с узкими длинными полостями возможность промывания должна быть обеспечена до их установки в моечное устройство или до подключения этого устройства.
- Полые инструменты следует устанавливать в соответствующие тележки, модули и вставки отверстием вниз, чтобы моющий раствор мог беспрепятственно поступать и вытекать через отверстие.
- Обрабатываемый материал с глубоким дном устанавливайте по-возможности в наклонном положении, чтобы из него мог вытекать моющий раствор.
- Высокие, узкие полые инструменты размещайте в средней части тележки, если они не промываются непосредственно с помощью промывочного устройства. При этом полые инструменты будут лучше промываться изнутри струями воды.
- Разборный обрабатываемый материал следует разобрать в соответствии с указаниями изготовителя и обрабатывать разобранные детали отдельно друг от друга.

- Лёгкий обрабатываемый материал следует защитить сетчатой крышкой, чтобы он не заблокировал распылительное коромысло в моечной камере.
- Небольшие и мелкие предметы для обработки помещайте только в специальные вставки, закрываемые сетчатые контейнеры или сетчатые вставки.
- Распылительные коромысла не должны быть заблокированы слишком высокими или выступающими вниз предметами.
- Стекланный бой может привести к опасным травмам при загрузке и разгрузке. Повреждённый материал из стекла не следует мыть в моечном автомате.
- Никелированные и хромированные инструменты и инструменты из алюминия при определённых условиях пригодны для машинной обработки. Для этого обрабатываемого материала требуются специальные технологические условия.
- Для обрабатываемого материала полностью или частично изготовленного из пластмассы учитывать его максимальную термостойкость и выбирать либо соответствующую программу, либо настроить температуру в программе.

Подготовить обрабатываемый материал

⚠ Опасность взрыва вследствие воспламеняемых газов. Горючие растворители с температурой возгорания ниже 21 °C выделяют газы и могут создавать воспламеняемые газовые смеси.

Загружайте в автомат для мойки обрабатываемый материал в худшем случае только со следами растворителей.

Сразу запустите программу обработки после того, как автомат для мойки будет загружен использованным обрабатываемым материалом.

⚠ Материальный ущерб из-за растворителя. Растворители с температурой возгорания выше 21 °C могут повреждать эластомеры и пластики. При этом нарушится герметичность автомата для мойки.

Загружайте в автомат для мойки обрабатываемый материал в худшем случае только со следами растворителей.

Сразу запустите программу обработки после того, как автомат для мойки будет загружен использованным обрабатываемым материалом.

Особенности используемой техники

⚠ Материальный ущерб вследствие коррозии.

Хлоридсодержащие растворы, особенно соляная кислота, а также корродирующая продукция чёрной металлургии разъедают сталь автомата для мойки и загрузочного устройства. Не добавляйте хлоридсодержащие растворители в автомат для мойки!

Не размещайте корродирующие продукты чёрной металлургии в автомате для мойки!

⚠ Опасность распространения инфекции.

Микробиологический материал, патогенные микроорганизмы, факультативные патогенные микроорганизмы или генномодифицированный материал может вызвать инфекцию или нанести вред окружающей среде.

Перед машинной обработкой определите, должен ли заражённый обрабатываемый материал стерилизоваться.

- В этом случае перед размещением обрабатываемый материал необходимо опорожнить для соблюдения соответствующих предписаний.
- С помощью растворителей удалите загрязнения, которые не растворяются в воде, например лаки, клей, полимерные соединения.
- Обрабатываемый материал, увлажнённый растворителями, хлоридсодержащими растворами или соляной кислотой, необходимо тщательно промыть и дать стекать влаге. Сразу после загрузки автомата для мойки запустите программу обработки.
- Сделайте отверстие в питательной среде (агар) в чашке Петри.
- Удалите остатки крови и кровяные сгустки.
- При необходимости быстро ополосните обрабатываемый материал водой, чтобы предотвратить занесение большого количества загрязнений в автомат для мойки.
- Удалите заглушки, пробки, этикетки, остатки герметизирующего материала и т. д.
- Разместите мелкие детали, такие как заглушки и краны, в подходящие корзины для мелких деталей.

Предварительно удалите сложноудаляемые вспомогательные средства и вещества, которые заражают обрабатываемый материал в дополнение к имеющемуся загрязнению. Сюда относятся, например, смазка для шлифовальных поверхностей, бумажные этикетки и надписи.

Перед запуском программы

Перед каждым запуском программы проверяйте следующие пункты (визуальная проверка):

- Правильно ли размещён и подключён обрабатываемый материал?
- Проходит ли моющий раствор через обрабатываемый материал с 2 отверстиями (например, через пипетки или вискозиметр)?
- Чистые ли распылительные коромысла и могут ли они свободно вращаться?
- Не загрязнён ли комбинированный фильтр?
Удалите большие загрязнения, при необходимости очистите комбинированный фильтр.
- Правильно ли подсоединена тележка к водоснабжению?
- Надёжно ли зафиксированы или подсоединены съёмные модули, промывочные сопла, форсунки и прочие промывочные устройства?
- Достаточно ли заполнены контейнеры для химических средств процессов?

После завершения программы

После завершения каждой программы проверяйте следующие пункты:

- Прочно ли соединены сопла и разъёмы с тележкой, модулем или вставкой?
- Находятся ли все полые инструменты на соответствующих соплах?
- Изменилось ли положение обрабатываемого материала на загрузочных устройствах во время обработки?

На результат обработки может повлиять изменение положения обрабатываемого материала.

Оцените, требуется ли повторная обработка, например, для перевёрнутых чашек Петри или упавших пробирок

- Проверьте результат обработки предметов визуально.
- Прошел ли моющий раствор через обрабатываемый материал с 2 отверстиями?
- Если автомат для мойки оснащён сушильным агрегатом, проверяйте результаты просушки обрабатываемого материала визуально.

Лабораторная посуда и принадлежности

...с широким горлом

Обрабатываемый материал с широким горлом, например химические стаканы, широкогорлые колбы Эрленмейера и чашки Петри, или цилиндрической формы, например пробирки, может обрабатываться изнутри и снаружи благодаря вращающимся распылительным коромыслам.

Для этого обрабатываемый материал устанавливается во вставках и вставляется в пустую тележку с распылительным коромыслом.

...с узким горлом

Для обрабатываемого материала с узким горлом, например для конических колб Эрленмейера, круглодонных и мерных колб, а также пипеток, требуются специальные загрузочные устройства.

К загрузочным устройствам прилагаются отдельные инструкции по эксплуатации.

При размещении обязательно учитывайте следующее:

- Чашки Петри и т. п. устанавливаются в соответствующую вставку загрязнённой стороной вниз.
- Острые части пипеток должны быть направлены вниз.
- Вставки необходимо размещать не менее, чем на 3 см от края загрузочного устройства.
- Вставки для пробирок размещаются посередине над диаметром вращения распылительного коромысла, чтобы углы загрузочного устройства оставались свободными.
- Во избежание повреждения стекла следует использовать защитную сетку.

Обзор программ

В заводских настройках программы обработки присвоены тележке А 503. Следующие модули можно использовать в различных комбинациях:

- А 612
- А 620
- А 621
- А 622

Исключение составляют программы Ампулы и Пипетки, см. таблицу.

Для применения других тележек в веб-интерфейсе в пункте «Управл. загр. тележками» необходимо указать новые загрузочные устройства. «Управл. загр. тележками» описывается в руководстве по программированию.

Уровни мощности

Тележки с модульной концепцией загрузки можно оснастить разными модулями. В зависимости от вида и количества используемых модулей для реализации необходимого давления промывки требуется разное количество воды и частота вращения насосов. Поэтому отдельные программы обработки предоставляются с несколькими уровнями мощности. Чем выше уровень мощности программы обработки, тем больше объём воды и частота вращения насосов.

Структура программы и параметры мощности в уровнях мощности идентичны:

- качество воды
- температура
- время выдержки
- дозируемое химическое моющее вещество в %
- температура сушки
- продолжительность сушки

(см приложение, таблицу «Уровни мощности/тележки/комбинации модулей»)

Особенности используемой техники

Общая информация о программах

Программа	Область применения	Тележка
Мини	<ul style="list-style-type: none">- очень короткая программа для слабозагрязнённого обрабатываемого материала и очень низких требований к результатам мойки- для самых различных загрязнений- не подходит для денатурированных остатков, таких как протеины- не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов- на 2 уровня загрузки	A 503
Стандартная	<ul style="list-style-type: none">- короткая программа для слабозагрязнённого обрабатываемого материала и низких требований к результатам мойки- для самых различных загрязнений- не подходит для денатурированных остатков, таких как протеины- не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов- на 2 уровня загрузки	A 503
Универсальная	<ul style="list-style-type: none">- программа для обрабатываемого материала лёгкой и средней степени загрязнения и средних требований к результатам мойки- для удаления органических загрязнений- ограниченно подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов- на 2 уровня загрузки	A 503
Интенсивная	<ul style="list-style-type: none">- программа для обрабатываемого материала средней и сильной степени загрязнения и средних и высоких требований к результатам мойки- для удаления органических загрязнений- ограниченно подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов- на 2 уровня загрузки	A 503

Программы для специфических загрязнений

Программа	Область применения	Тележка
Неорганическая	<ul style="list-style-type: none"> - программа для обрабатываемого материала лёгкой и средней степени загрязнения и средних и высоких требований к результатам мойки - для удаления неорганических, растворимых в кислотах загрязнений, например солей металлов - на 2 уровня загрузки 	А 503
Органическая	<ul style="list-style-type: none"> - программа для обрабатываемого материала средней и сильной степени загрязнения и средних требований к результатам мойки - для удаления сильных органических загрязнений, например смазки и воска, а также засохших или термически зафиксированных органических загрязнений - не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов - на 2 уровня загрузки 	А 503
Масляные загрязнения	<ul style="list-style-type: none"> - программа для обрабатываемого материала сильной степени загрязнения и средних требований к результатам мойки - для удаления масел, жиров и частично воска - не подходит для неорганических остатков, растворимых в кислоте, таких как соли металлов - на 2 уровня загрузки 	А 503
Агар	<ul style="list-style-type: none"> - программа для обрабатываемого материала средней и сильной степени загрязнения и средних требований к результатам мойки - для удаления агара - на 2 уровня загрузки 	А 503

Особенности используемой техники

Программы для специально обрабатываемого материала

Программа	Область применения	Тележка
Пластик	<ul style="list-style-type: none">- программа для пластика лёгкой и средней степени загрязнения и средних требований к результатам мойки- для лабораторных приборов, чувствительных к воздействию высокой температуры, например пластмассовых бутылок с термостойкостью до 55 °С- на 2 уровня загрузки	A 503
Ампулы	<ul style="list-style-type: none">- программа для обрабатываемого материала лёгкой и средней степени загрязнения, обрабатываемого материала небольшого размера и средних и высоких требований к результатам мойки- для виал, центрифужных пробирок и пробирок- на 2 уровня загрузки	A 503 + A 605
Пипетки	<ul style="list-style-type: none">- программа для пипеток средней и высокой степени загрязнения, средних и высоких требований к результатам мойки- для измерительных и обычных пипеток- макс. 3 модуля в один ряд	A 503 + A 613

Дополнительные программы

Программа	Область применения	Тележка
Дезинфекция 93/10	<ul style="list-style-type: none"> - программа для мойки и термической дезинфекции при температуре 93 °С и времени выдержки 10 мин в первом программном блоке, откачивание моющего раствора только после дезинфекции - на 2 уровня загрузки 	А 503
Ополаскивание холодной водой	<ul style="list-style-type: none"> - программа для промывания обрабатываемого материала холодной водой, например, для удаления: <ul style="list-style-type: none"> - сильных загрязнений - остатков дезинфицирующих средств или <ul style="list-style-type: none"> - для предотвращения высыхания и покрытия коркой соединений на обрабатываемом материале до начала программы обработки 	А 503
Ополаскивание обессол. водой	<ul style="list-style-type: none"> - программа для промывания обрабатываемого материала полностью обессоленной водой, например, для удаления: <ul style="list-style-type: none"> - сильных загрязнений - остатков дезинфицирующих средств или <ul style="list-style-type: none"> - для предотвращения высыхания и покрытия коркой соединений на обрабатываемом материале до начала программы обработки 	А 503
Сушка	<ul style="list-style-type: none"> - программа для сушки термостабильного обрабатываемого материала - не подходит для обрабатываемого материала, чувствительного к температуре 	А 503

Особенности используемой техники

Сервисная программа

Программа	Область применения	Тележка
Опустошить ёмкость	Программа для опорожнения баков, например, для длительного простоя; моечная камера должна быть пустой ¹⁾	Ноль
Дезинфекция вручную	Программа для опорожнения моечной камеры, если моющий раствор должен быть обеззаражен при прерывании программы путём добавления дезинфицирующего средства (см. главу «Эксплуатация, прерывание программы»)	A 503

1) В зависимости от настройки параметра Готовность в веб-интерфейсе в Подача воды/Ёмк. для полн. обессол. воды после завершения программы бак автоматически снова заполняется (см. руководство по программированию, глава «Система, конфигурация приборов, подача воды»).

В этой главе описываются частые причины возможных химических взаимодействий между имеющимися загрязнениями, химическими веществами и компонентами автомата для мойки и какие меры в этом случае требуются.

Эта глава является вспомогательной. Если в процессе Вашей работы появляются непредусмотренные взаимодействия, или у Вас есть вопросы по этой теме, то обращайтесь в сервисную службу Miele.

Общие указания	
Последствия	Меры
<p>Если эластомеры (уплотнения и шланги) и пластики автомата для мойки повреждены, это может привести, например, к набуханию, усадке, затвердению, появлению хрупкости в материалах и образованию трещин. Они не смогут выполнять свои функции, что, как правило, ведёт к потере герметичности.</p>	<p>- Определите и устраните причины повреждения.</p> <p>Также в этой главе см. информацию по темам «Подаваемые химические средства процессов», «Нанесённые загрязнения» и «Реакция между химическими средствами процессов и загрязнениями».</p>
<p>Сильное пенообразование во время выполнения программы отрицательно влияет на очистку и промывку обрабатываемого материала. Выступившая из моечной камеры пена может привести к повреждениям автомата для мойки. При пенообразовании процесс очистки не стандартизирован и не подтверждён.</p>	<p>- Определите и устраните причины пенообразования</p> <p>- Регулярно проверяйте процесс обработки для выявления пенообразования</p> <p>Также в этой главе см. информацию по темам «Подаваемые химические средства процессов», «Нанесённые загрязнения» и «Реакция между химическими средствами процессов и загрязнениями».</p>
<p>Коррозия нержавеющей стали моечной камеры и принадлежностей может проявляться по-разному:</p> <ul style="list-style-type: none"> - образование ржавчины (красные пятна/изменение цвета) - чёрные пятна/изменение цвета - белые пятна/изменение цвета (гладкая растравленная поверхность) <p>Точечная коррозия может привести к потере герметичности автомата для мойки. В зависимости от применения коррозия может отрицательно влиять на результат очистки и промывки (лабораторный анализ) или вызывать коррозию обрабатываемого материала (нержавеющая сталь).</p>	<p>- Определите и устраните причины коррозии</p> <p>Также в этой главе см. информацию по темам «Подаваемые химические средства процессов», «Нанесённые загрязнения» и «Реакция между химическими средствами процессов и загрязнениями».</p>

Химическая технология

Подаваемые химические средства процессов	
Последствия	Меры
Составные части химических средств процессов оказывают сильное влияние на срок службы и функциональность (производительность) систем дозирования.	<ul style="list-style-type: none">- Соблюдайте указания и рекомендации производителей химических средств процессов.- Регулярно проводите визуальный осмотр систем дозирования на предмет повреждений.- Регулярно проверяйте пропускную способность системы дозирования.- Соблюдайте циклы техобслуживания.- Свяжитесь с компанией Miele.
Химические средства процессов могут повреждать эластомеры и пластик автомата для мойки и принадлежностей.	<ul style="list-style-type: none">- Соблюдайте указания и рекомендации производителей химических средств процессов.- Регулярно проводите визуальный осмотр всех доступных эластомеров и пластиков на предмет повреждений.
Перекись водорода может выделять большой объем кислорода.	<ul style="list-style-type: none">- Используйте только проверенные методы.- Для перекиси водорода температура очистки должна быть ниже 70 °C.- Свяжитесь с компанией Miele.
Следующие химические средства процессов могут привести к сильному пенообразованию: <ul style="list-style-type: none">- чистящие средства и ополаскиватели с содержанием тензида Пена может образовываться: <ul style="list-style-type: none">- в программном блоке, в котором дозируются химические вещества процессов- при перемещении в следующий программный блок- при дозировании ополаскивателя вследствие перемещения в следующую программу	<ul style="list-style-type: none">- Параметры процесса программы очистки, например температура дозирования, концентрация и т. п., должны устанавливаться таким образом, чтобы весь процесс сопровождался низким пенообразованием/отсутствием пены.- Соблюдайте указания производителей химических средств процессов.

Подаваемые химические средства процессов	
<p>Пеногасители, особенно на основе силикона, могут привести к следующим последствиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - появление отложений в моечной камере - появление отложений на обрабатываемом материале - повреждение эластомеров и пластиков автомата для мойки - повреждение определённых видов пластика обрабатываемого материала, таких как поликарбонаты, оргстекло и т. п. 	<ul style="list-style-type: none"> - Используйте пеногасители только в исключительных случаях или при их абсолютной необходимости. - Периодически очищайте моечную камеру и принадлежности без обрабатываемого материала и без пеногасителя в программе Органическая. - Свяжитесь с компанией Miele.
Загрязнения	
Последствия	Меры
<p>Следующие вещества могут повреждать эластомеры в шлангах и уплотнениях, а также пластик автомата для мойки и принадлежностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - масла, воск, ароматические и ненасыщенные углеводороды - смягчители - косметические средства, средства для ухода и гигиены, например кремы 	<ul style="list-style-type: none"> - В зависимости от использования автомата для очистки периодически протирайте нижнее уплотнение дверцы безворсовой салфеткой или губкой. - Периодически очищайте моечную камеру и принадлежности без обрабатываемого материала в программе Органическая. - Используйте программу Масляные загрязнения или специальную программу с дозированием рН-нейтральных очистителей с содержанием тензида для предварительного ополаскивания.
<p>Следующие вещества могут привести к сильному пенообразованию во время очистки и промывания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства для обработки, например дезинфицирующие, чистящие средства и т. д. - реагенты для аналитики, например, для пластин с микротитрами - косметические средства, средства для ухода и гигиены, например шампуни и кремы - общие пеноактивные вещества, например тензиды 	<ul style="list-style-type: none"> - Обрабатываемый материал необходимо предварительно промыть и ополоснуть с достаточным количеством воды. - Выберите программу очистки с быстрым однократным или многократным предварительным ополаскиванием холодной или тёплой водой. - Добавление пеногасителя с учётом применения, по возможности без силиконовых масел.

Химическая технология

Загрязнения	
<p>Следующие вещества могут привести к коррозии нержавеющей стали моечной камеры и принадлежностей:</p> <ul style="list-style-type: none">- соляная кислота- прочие вещества с содержанием хлоридов, например хлорид натрия и т. п.- концентрированная серная кислота- хромовая кислота- железная стружка и частицы железа	<ul style="list-style-type: none">- Обрабатываемый материал необходимо предварительно промыть и ополоснуть с достаточным количеством воды.- Только в подсушенном, без капель, состоянии устанавливайте обрабатываемый материал на тележки, модули и вставки и размещайте его в моечной камере.- После размещения обрабатываемого материала в моечной камере запустите программу обработки.
Реакции между химическими средствами и загрязнениями	
Последствия	Меры
<p>Натуральные масла и жиры могут омыляться щелочными химическими средствами процессов. При этом возможно сильное пенообразование.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Используйте программу Масляные загрязнения.- Используйте специальную программу с дозированием рН-нейтральных очистителей с содержанием тензида для предварительного ополаскивания.- Добавление пеногасителя с учётом применения, по возможности без силиконовых масел.
<p>Загрязнения, содержащие высокую концентрацию белка, например кровь, вместе с щелочными химическими средствами могут привести к сильному пенообразованию.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Выберите программу очистки с быстрым однократным или многократным предварительным ополаскиванием холодной водой.
<p>Недрагоценные металлы, например алюминий, магний, цинк, вместе с кислотными или щелочными химическими средствами выделяют водород (образование гремучего газа).</p>	<ul style="list-style-type: none">- Соблюдайте указания производителей химических средств процессов.

⚠ Опасность для здоровья вследствие использования неподходящих химических средств.

Использование неподходящих химических средств, как правило, не ведёт к желаемому результату обработки и может стать причиной травм персонала и повреждений оборудования.

Используйте только специальные химические средства для моющих автоматов, следуйте рекомендациям по применению соответствующих производителей.

Неукоснительно соблюдайте их указания по токсикологически безопасным остаткам.

⚠ Опасность для здоровья вследствие использования химических средств процессов.

Химические средства процессов могут быть частично едкими и раздражающими веществами.

При обращении с химическими веществами процессов соблюдайте действующие предписания по технике безопасности, а также информацию, которую приводит производитель химических средств в паспорте безопасности.

Примите все защитные меры, указанные производителем химических средств процессов, например, носите защитные очки и перчатки.

Дозирующие системы

Автомат для мойки в стандартном исполнении оснащён 2 системами для дозирования жидкого моющего средства и нейтрализующего средства. Опционально можно установить до 4 дополнительных внутренних дозирующих систем.

Дозирующие системы и всасывающие трубки должны иметь цветовую кодировку. В комплект поставки входят наклейки следующих цветов:

- синий
- белый
- красный
- зелёный
- жёлтый
- чёрный

Записывайте используемые химические средства процессов и соответствующие им цвета в следующую таблицу, если установлена дополнительная система дозирования. При подключении контейнеров с химическими веществами цветовой код облегчает соотнесение им соответствующих всасывающих трубок.

Дозирование жидких химических средств

Система дозирования	Цветовой код	Химическое средство
1	синий	
2		
3	красный	
4		
5		
6		

Вместо 4 опциональных внутренних систем дозирования можно подключить 4 внешние системы дозирования.

Если система должна дозировать разные химические средства, то смена химикатов должна осуществляться исключительно сервисной службой Miele или авторизованными специалистами.

Контейнеры для химических средств

За сервисной крышкой находится выдвижной отсек для контейнеров с химическими средствами. В выдвижном отсеке предусмотрено место для 4 контейнеров вместимостью 5 л. Другие контейнеры должны устанавливаться вне автомата для мойки.


Выдвижной отсек оснащён подложками. Подложки обеспечивают удобную наклонную установку контейнеров. Контейнеры должны располагаться на подложках таким образом, чтобы всасывающая трубка находилась на нижней стороне.

Всегда устанавливайте 4 контейнера в выдвижной отсек, даже если требуется меньшее количество химических средств. Это предотвратит падение контейнера при открытии или закрытии выдвижного отсека.


Дозирование жидких химических средств

Заполнение контейнеров химических средствами

Заполните контейнер для химических средств или замените его на полный контейнер, если на дисплее отображается соответствующее сообщение, например Наполнить ёмкость системы дозирования 1.

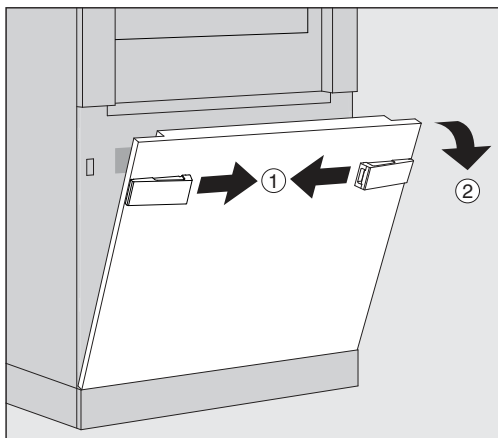


- Разблокируйте сервисную крышку автомата для мойки ①.
- Отклоните сервисную крышку вперёд ②, приподнимите и извлеките из нижних креплений.

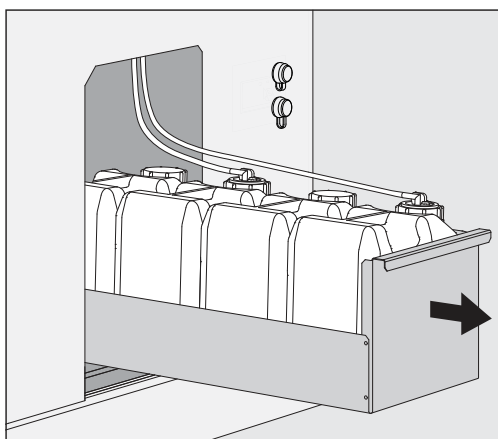

- Вытяните выдвижной ящик с контейнерами для жидких химических веществ.
- Извлеките из выдвижного ящика соответствующий контейнер.
- Отвинтите всасывающую трубку и извлеките её.
- Заполните контейнер необходимым химическим веществом или замените на новый контейнер.

Соблюдайте цветовой код системы дозирования и всасывающей трубки, чтобы не перепутать химические вещества!

Дозирование жидких химических средств

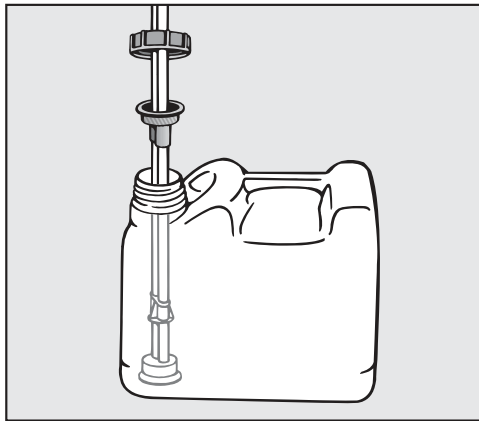

- Вставьте всасывающую трубку в отверстие контейнера и закрутите до упора.
- Установите контейнер в выдвижной отсек.

Всасывающая трубка должна находиться на нижней стороне подложки.

- Переместите выдвижной отсек в автомат для мойки.
- Вставьте сервисную крышку в нижние крепления автомата для мойки и прижмите.
- Заблокируйте сервисную крышку.
- Подтвердите сообщение Заполнить контейнер системы дозирования «х» нажатием кнопки **OK**.

После каждого заполнения или замены контейнера необходимо выполнить функцию Наполнить систему дозирования, чтобы удалить из системы дозирования имеющийся воздух.

Заполнение дозирующей системы

Дозирующую систему необходимо заполнить, если:

- соответствующий контейнер был заполнен или заменён новым
- была произведена замена химического средства

Из дозирующей системы можно удалить воздух, если в моечной камере не находится загрузочное устройство.

- Вызовите меню Система.
- Вызовите пункт меню Функции машины.
- Вызовите пункт меню Наполнить систему дозирования.
- Нажмите кнопку соответствующей системы дозирования, например DOS 1.

Система дозирования будет заполнена.

Включение и выключение автомата для мойки

Главный выключатель **I/O** отключает автомат для мойки от сети. Он находится на стороне загрузки автомата для мойки рядом с дисплеем.

- Нажмите главный выключатель **I**, чтобы включить автомат для мойки.

После завершения процесса загрузки моечный автомат готов к эксплуатации.

- Нажмите главный выключатель **O**, чтобы выключить автомат для мойки.

Система управления автомата для мойки завершает работу, автомат отсоединяется от сети.


PLW 8616

Для аварийных случаев на стороне выгрузки автомата для мойки рядом с дисплеем находится второй главный выключатель **O**. От также отключает автомат от сети. Повторное включение возможно только на стороне загрузки.

Загрузка моечной камеры

Загрузочная тележка задвигается со стороны загрузки в моечную камеру автомата для мойки.

- Нажмите кнопку **◀▶**, чтобы открыть дверцу на стороне загрузки.
- Задвиньте загрузочное устройство от транспортировочной тележки в моечную камеру автомата для мойки.

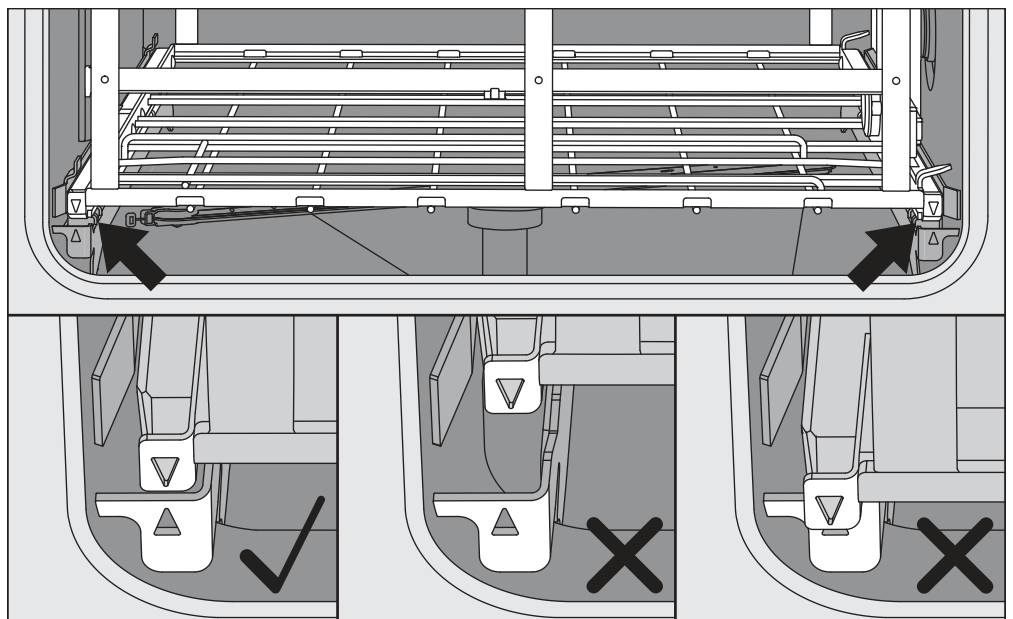

Отметки на загрузочном устройстве ▼ и в моечной камере ▲ должны совпадать, т. е. быть на одном уровне.

- Нажмите кнопку **▶◀**, чтобы закрыть дверцу автомата для мойки.


Выбор программы

Программы обработки присвоены определённым загрузочным устройствам. Поэтому сначала загрузочное устройство необходимо выбрать с помощью пиктограммы.


Выбор загрузочного устройства


- Нажмите кнопку  Обработка.

На дисплее отображается меню для выбора загрузочного устройства с помощью пиктограммы.

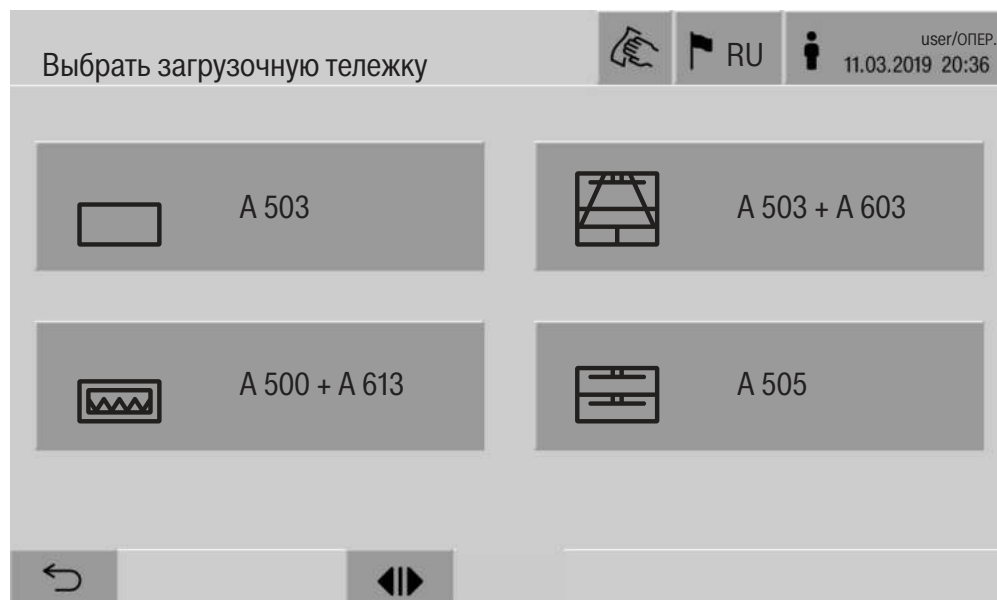

Если имеется больше 4 загрузочных устройств, в меню выбора можно пролистывать несколько страниц.

- Нажмите кнопку требуемого загрузочного устройства, например  A 503.



В верхней строке отображается пиктограмма выбранного загрузочного устройства, например  Обработка.

На дисплее перечислены доступные для выбора программы обработки.

- Нажмите кнопку требуемой программы обработки.


Отобразится индикатор запуска программы.


Выбор программы из Персональных программ


Если в меню  Система, Управл. персональн. программами были определены программы обработки, выбор программы доступен с помощью кнопки  Персон. программы.

- Нажмите кнопку  Персон. программы.

Отобразится меню Выбрать загрузочную тележку.

- Нажмите кнопку требуемого загрузочного устройства, например  А 503.

В верхней строке отображается пиктограмма выбранного загрузочного устройства, например  Персон. программы.

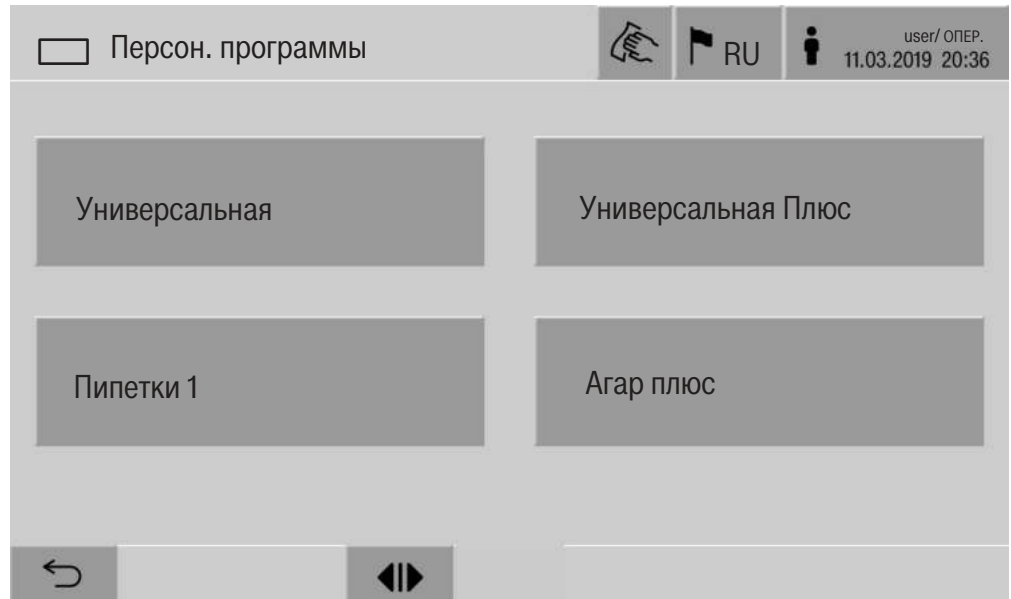


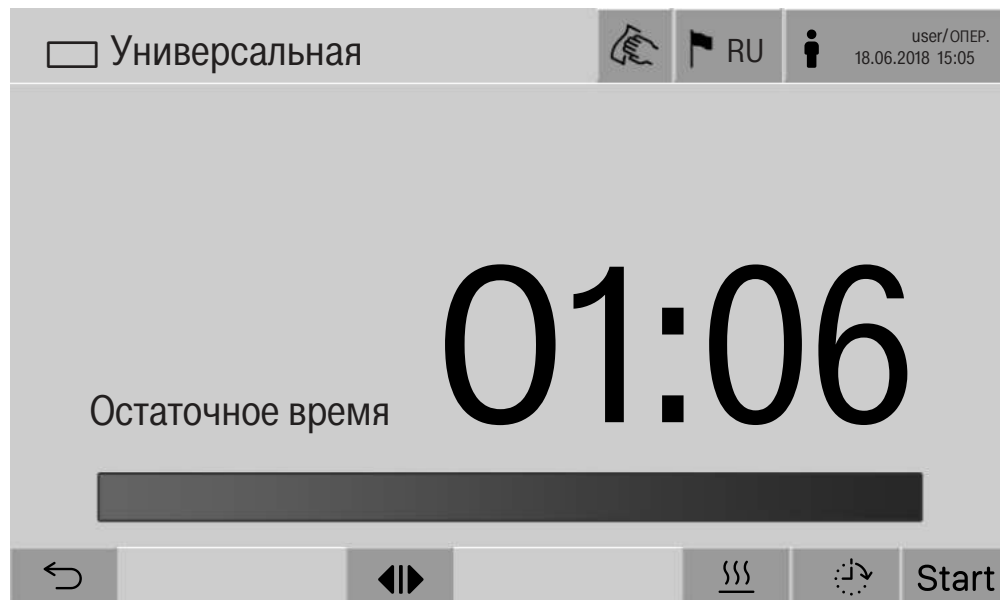
На дисплее в качестве персональной программы отображается определённая программа обработки, в этом примере – программа Универсальная.

- Нажмите кнопку требуемой программы обработки.

Отобразится индикатор запуска программы.

Запуск программы

Убедитесь, что в верхней строке дисплея отображается правильная программа обработки для загрузочного устройства. С помощью кнопки  можно вызвать меню для выбора программ обработки, если требуется другая программа.




После выбора программы обработки отображается оставшееся время работы программы. Если параметр Показать ост. время выполнения не активирован в веб-интерфейсе, после запуска программы индикатор будет показывать уже истёкшее время выполнения программы.

- Нажмите кнопку Start.

Программа обработки выполняется.

Запуск программы обработки возможен только тогда, когда дверцы автомата для мойки закрыты и отсутствуют сообщения об ошибках.

Если в нижней строке отображается символ , сначала обработайте список с активными сообщениями (см. главу «Сообщения об ошибках и указания»).

Выполнение программы

После запуска программа выполняется автоматически. Подробную информацию о выполнении и параметрах программы можно увидеть на дисплее автомата для мойки (см. главу «Описание прибора», раздел «Элементы управления на дисплее»).

Завершение программы

После завершения программы на дисплее отображается следующая информация:

- Номер цикла
- время, прошедшее с завершения программы
- Результат процесса обработки
- сообщение Программа закончена

Цвет индикатора прогресса изменится с белого на зелёный. В соответствии с предварительной настройкой можно автоматически включить освещение моечной камеры.

Прервать программу

Программу обработки можно прервать в любое время. Моющий раствор откачивается, затем дверца на стороне загрузки разблокируется.

- Нажмите кнопку Stop.

На дисплее отображается запрос безопасности :
Прервать встречу?

- Подтвердите запрос безопасности с помощью Да.

После завершения слива воды на дисплее отобразится следующее сообщение:

Прерыв. программы.

Индикатор прогресса красный, отображается следующее сообщение:

Отмена программы пользователем.

После подтверждения сообщения об ошибке программу можно перезапустить.

Эксплуатация

Прерывание программы с ручной дезинфекцией

В программах с активированным параметром Слив воды после дезинфекции могут потребоваться дополнительные шаги для прерывания программы. Без выполнения термической дезинфекции моющий раствор должен быть обеззаражен вручную.

прерывание программы вручную

Во время первого блока программы:

- Нажмите кнопку **Stop** и подтвердите запрос Прервать встречу? с помощью **Да**.

Отображается сообщение об ошибке Отмена программы пользователем.

В моечной камере имеется моющий раствор, он не откачивается.

прерывание программы вследствие ошибки

Если прерывание программы было вызвано ошибкой во время первого программного блока, моющий раствор не откачивается. Необходимые рабочие шаги приведены в пункте «Дезинфекция вручную».

дезинфекция вручную

- Подтвердите сообщение об ошибке в списке нажатием **ОК**.
- Подтвердите прерывание программы нажатием **ОК**.

На индикаторе выполнения программы отображается сообщение Выгрузите.

- Откройте дверцу на стороне загрузки.
- Моющий раствор должен быть продезинфицирован путём добавления дезинфицирующего средства.
- Закройте дверцу на стороне загрузки.
- Выберите загрузочное устройство.
- Выберите и запустите программу Дезинфекция вручную из списка программ, присвоенных загрузочному устройству.

Моющий раствор будет откачан, отобразится следующее сообщение об ошибке.


- Подтвердите сообщение об ошибке в списке нажатием **ОК**.

Дверцу на стороне загрузки можно открыть.

Настройка времени отложенного запуска

Существует возможность отсрочки старта программы, например, чтобы использовать электроэнергию ночью по более выгодному тарифу. Время запуска можно установить с точностью до минуты.

Продолжительное подсушивание может ухудшить результат обработки. Кроме того, возрастает риск появления коррозии для инструментов из нержавеющей стали.

- Для настройки времени отложенного запуска нажмите кнопку  в нижней строке.
- С помощью отображаемой экранной клавиатуры введите Время запуска и подтвердите нажатием **ОК**.


В установленное время программа обработки автоматически запускается.

Автоматический запуск программы можно прервать в любое время. Для этого нажмите кнопку **stop** в нижней строке. Отобразится запрос подтверждения: Прервать отсрочку старта?. После подтверждения запроса программу обработки можно запустить вручную.

Подключение к сети

Автомат для мойки можно подключить к внутренней сети с помощью интерфейса Ethernet. В этой сети разрешается эксплуатировать только те системы, которые необходимы для доступа к автомату для мойки с помощью веб-интерфейса и для документации результатов обработки, например компьютер с программным обеспечением для документации. Для подключения требуется стандартный сетевой кабель, Ethernet-кабель CAT5 или выше.

Сетевой кабель может подключаться к разъёму только силами сервисной службы.

 Неавторизованный доступ может представлять опасность для здоровья.

Через сеть посредством неавторизованного доступа можно изменять настройки автомата для мойки, например параметры для дезинфекции или дозирование химических средств.

Доступ к автомату для мойки не должен осуществляться через Интернет или другие общедоступные или небезопасные сети, напрямую или косвенно, например, посредством переадресации портов!

IP-адреса от 192.168.10.1 до 192.168.10.255 зарезервированы для сервисной службы! Запрещается устанавливать их в домашней сети!

1. Используйте автомат для мойки только в отдельном сегменте сети, который отвечает следующим двум требованиям:
 - она физически отделена от других сегментов сети
 - доступ ограничен брандмауэром или соответствующим образом настроенным маршрутизатором
2. Ограничьте доступ к этому сегменту сети до необходимого круга лиц!
3. Защитите доступ к системам, которые подключены к автомату для мойки, с помощью надёжного пароля.
4. Настройте интерфейс Ethernet.

Протоколы сети

Автомат для мойки поддерживает коммуникацию посредством следующих протоколов сети:

Протоколы сети	Описание	Порт
DHCPv4	Выдача динамических адресов IPv4	68/UDP
DHCPv6	Выдача динамических адресов IPv6	546/UDP
NTP	Сервер времени	123/UDP
HTTPS	Веб-интерфейс для ввода параметров автомата для мойки	443/TCP

Дополнительно поддерживаются протоколы ICMPv4 и ICMPv6.

Протоколирование параметров процесса

Процессы обработки в автомате для мойки можно фиксировать с помощью внешнего программного обеспечения для протоколирования параметров процесса, внутреннего или внешнего принтера.

При подключении принтера или компьютеров необходимо учитывать следующее:


- Используйте только компьютеры или принтеры, разрешённые согласно EN/IEC 60950 (например, VDE).
- Конструкция принтера или компьютера должна соответствовать месту установки.
- Удлинительный кабель от разъёма Ethernet не должен быть длиннее 100 м.

Более подробную информацию о подходящих печатающих устройствах и программном обеспечении можно получить у производителя автомата для мойки.

Системные настройки

Система


Меню  Система включает в себя следующие функции:

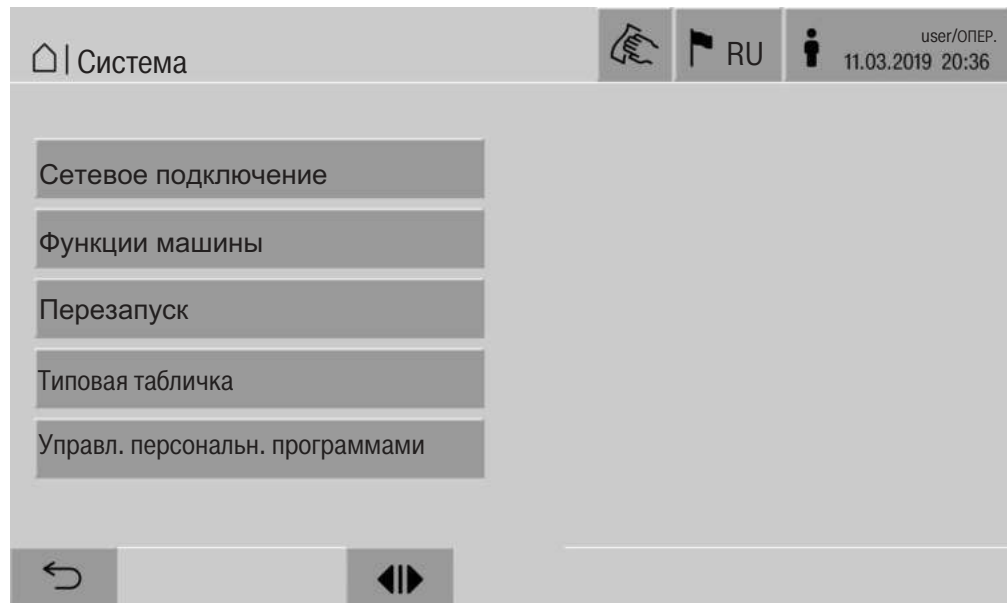

С помощью кнопок открываются подменю. Функции в подменю описываются на следующих страницах.

Сетевые подключения

Меню **Сетевое подключение** содержит функции для конфигурации сети и регистрации пользователей. После вызова меню **Сетевое подключение** отображается следующее меню:

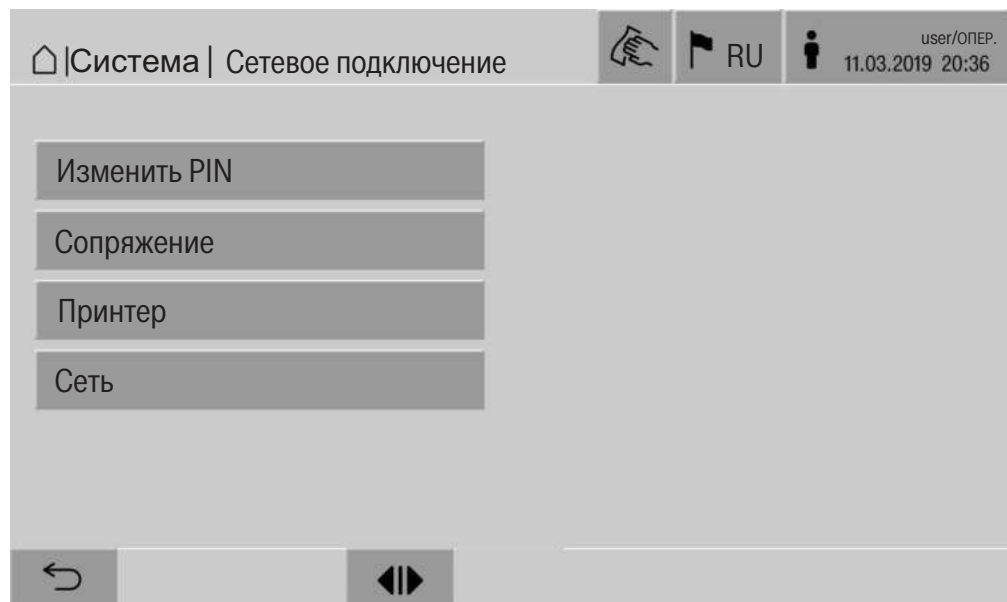

С помощью кнопок открываются подменю.

Изменение PIN-кода

Пользователь может в любое время изменить свой PIN-код.

Минимальная длина PIN-кода для уровня пользователя:

- Оператор 4-значный
- Инженерно-технические работники 6-значный
- Администратор 6-значный

- Нажмите кнопку Изменить PIN.

Отобразится запрос ввода для изменения PIN-кода. Кнопки рядом с параметрами открывают экранную клавиатуру.

- Введите старый PIN-код и два раза новый PIN-код, нажмите **ОК** для подтверждения.

Новый PIN-код будет сохранён в Управление пользоват. в веб-интерфейсе. Его не видно. Если пользователь забыл свой PIN-код, его можно сбросить в Управление пользоват..

PIN-код для уровня пользователя Администратор может быть сброшен только сервисной службой!

Если автомат для мойки подключён к сети, то внешние приложения могут получить доступ к системе управления автомата, например, программное обеспечение для Документация о процессе или веб-интерфейс (Web-интерфейс). При первом подключении необходимо выполнить Сопряжение между автоматом для мойки и внешним приложением.







Одновременно к автомату для мойки могут подключаться максимум 9 внешних приложений. Перед подтверждением нового запроса на подключение необходимо отключить старое соединение.

- Нажмите кнопку Сопряжение.

На дисплее отображается меню, в котором перечислены активные соединения и открытые запросы с датой и временем. Статус запроса на подключение отображается символами:

Символ	Функция
✓	Подключение подтверждено
↶	Разъединить подключение
:⇄	Запрошено подключение

Системные настройки

- Подтвердить подключение** Запрос на подключение необходимо подтвердить, чтобы у внешнего приложения был доступ к автомату для мойки. Для этого выдаётся PIN сопряжения длиной от 6 до 10 знаков.
- Нажмите кнопку .
- На дисплее отобразится экранная клавиатура для ввода PIN сопряжения.
- Введите PIN сопряжения и подтвердите нажатием **ОК**.
- Данный PIN сопряжения необходимо ввести во внешнее приложение для завершения подключения.
- Разъединение или отклонение подключения** Существующее подключение можно разъединить в любой момент, запрос на подключение можно отклонить.
- Нажмите кнопку  рядом с соответствующим приложением.
- Подключение разъединится, строка соответствующего приложения будет удалена из меню.
- Выдача прав записи** Если через веб-интерфейс необходимо загружать данные или изменять настройки автомата для мойки, зарегистрированный пользователь должен обладать правами записи. Если пользователь запросил права записи, на дисплее отобразится следующее сообщение:
-  Разрешить подключение с правом записи? ...
Дата/время
- Запрос прав записи можно подтвердить с помощью Login на автомате для мойки или отклонить нажатием кнопки .
- Нажмите кнопку Login для выдачи прав записи.
- На дисплее отобразится экранная клавиатура для логина. Во время внешнего доступа к автомату для мойки с правами записи на дисплее отобразится следующее сообщение:
Подключение с правами записи активно ...
- Право записи можно отозвать, для этого:
- Нажмите кнопку .
- На дисплее отобразится экранная клавиатура для логина. При входе в систему отменяются права записи, кнопка  сохраняет соединение с правом записи.

Права записи у зарегистрированного пользователя можно удалить в веб-интерфейсе. В таком случае вход в систему на дисплее автомата для мойки не требуется.

Настройка принтера

Подключённый принтер может настраиваться как через дисплей, так и через веб-интерфейс. Настройка через веб-интерфейс описывается в руководстве по программированию.

- Нажмите кнопку Принтер.
- Нажмите кнопку рядом с параметром Тип.

Меню отображается с типами принтеров, доступными для выбора.

Следует учитывать:

- Активируйте необходимый принтер нажатием кнопки рядом с обозначением типа.

Шкала на кнопке активированного принтера станет белой.

- Выйдите из меню нажатием кнопки ↩.

Необходимо указать соответствующий IP-адрес выбранного сетевого принтера.

- Нажмите кнопку рядом с параметром IP-адрес.

На дисплее отобразится экранная клавиатура для ввода IP-адреса.

- Введите IP-адрес и подтвердите нажатием **ОК**.

Параметр Прямой вывод на печать определяет, должен ли протокол обработки передаваться на подключённый принтер и распечатываться сразу после завершения программы. В дополнение к непосредственной печати протокол обработки сохраняется в системе управления автомата для мойки. Нажатием кнопки Документация в Главное меню можно распечатать дополнительные экземпляры протокола обработки.

- Нажмите кнопку рядом с параметром Прямой вывод на печать, чтобы активировать непосредственно печать.

Шкала на кнопке принтера станет белой.

Системные настройки

Настройка сети В меню **Сеть** настраивается подключение с Ethernet. Сеть можно настраивать как через дисплей автомата для мойки, так и через веб-интерфейс. Перед первым подключением, например, к сетевому принтеру, сеть необходимо настроить через дисплей автомата для мойки. Настройка через веб-интерфейс описывается в руководстве по программированию.

Необходимые данные для конфигурации сети можно получить у администратора сети.

- Нажмите кнопку **Сеть**.

На дисплее отображаются параметры для конфигурации сети. Кнопки рядом с параметрами открывают экранную клавиатуру.

- Введите необходимые значения для каждого параметра и подтвердите ввод нажатием **ОК**.

С помощью IP-адрес или Имя хоста можно активировать в сети автомат для мойки.

Ручной ввод


Параметры	Версия протокола IPv4	Версия протокола IPv6
Активно	активен	активен
DHCP	неактивен	неактивен
IP-адрес	поле ввода	поле ввода
Маска подсети	поле ввода	–
Длина префикса	–	поле ввода
Имя хоста	поле ввода	поле ввода
Стандартный Gateway	поле ввода	поле ввода
NTP	поле ввода	поле ввода

Автоматическое присвоение

Параметры	Версия протокола IPv4	Версия протокола IPv6
Активно	–	–
DHCP	активен	активен
IP-адрес	–	–
Маска подсети	–	–
Длина префикса	–	–
Имя хоста	поле ввода	поле ввода
Стандартный Gateway	–	–
NTP	–	–

Функции машины

Меню Функции машины содержит сервисные функции, например, для систем дозирования и установленных баков. После вызова меню Функции машины отображается следующее меню:

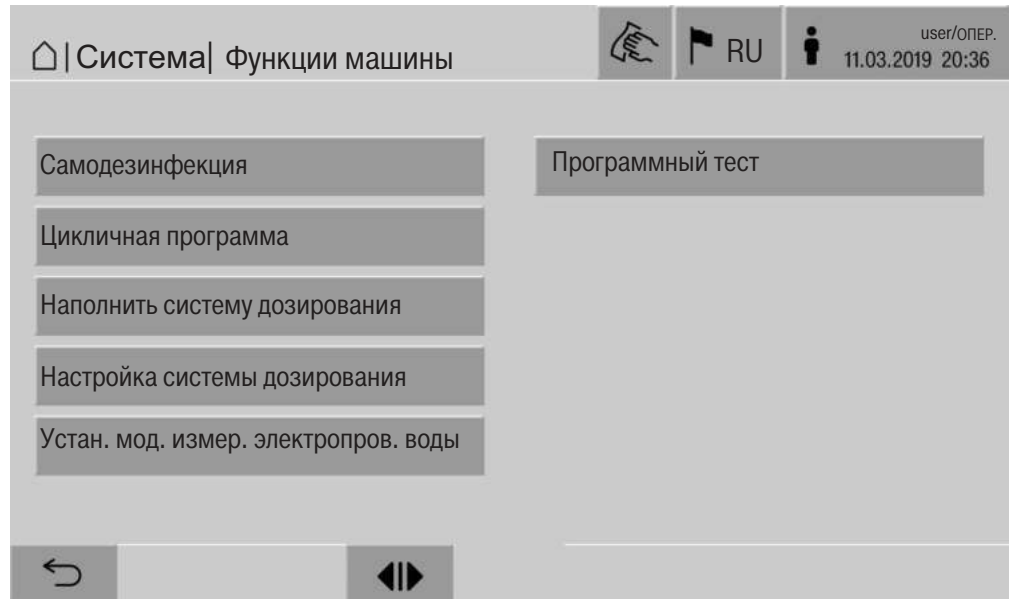

С помощью кнопок запускаются отдельные функции.

Автомат. системн. теста

Во время автоматической проверки системы в установленное время выполняется Самодезинфекция установленного бака (если имеется):

Условия для автоматической проверки системы:

- автомат для мойки включён
- моечная камера пуста
- дверца автомата для мойки закрыта

Автоматическую проверку системы можно выключить с помощью веб-интерфейса (см. руководство по программированию, глава «Система, конфигурация прибора, автоматическая проверка системы»).

Системные настройки

Провести самодезинфекцию (опционально)

Эта кнопка отображается, если автомат для мойки оснащён внутренним баком. Во время автоматической проверки системы внутренние баки автомата для мойки дезинфицируются посредством Самодезинфекция.

Если автоматическая самодезинфекция внутреннего бака не была завершена или была завершена с ошибками, эту функцию можно запустить вручную.

Самодезинфекция выполняется только в том случае, если в моечной камере не находится загрузочное устройство.

- Нажмите кнопку Самодезинфекция.

Необходимые этапы самодезинфекции выполняются автоматически. После завершения самодезинфекции на дисплее отображается сообщение:

Самодезинфекция успешно завершена.

или

Самодезинфекция не выполнена.

- Подтвердите сообщение кнопкой **ОК**.

Если самодезинфекция снова прошла неудачно, обратитесь в сервисную службу.

Самодезинфекцию можно прервать нажатием кнопки Stop в нижней строке. На дисплее отображается запрос подтверждения Прервать самодезинфекцию?. Нажатие Да прервёт самодезинфекцию, нажатие Нет она будет продолжена.

Запустить бесконечную программу

В меню Цикличная программа можно определить повторный запуск программы для программы обработки. Эту функцию можно использовать для испытаний, например для испытания материалов, или для периодического обеззараживания при длительном простое.

- Нажмите кнопку Цикличная программа.

На дисплее отображаются доступные для выбора загрузочные устройства.

- Нажмите кнопку требуемого загрузочного устройства.

На дисплее отображаются доступные для выбора программы обработки.

- Нажмите кнопку требуемой программы обработки.

На дисплее отображаются параметры для определения бесконечной программы. Кнопки рядом с параметрами открывают экранную клавиатуру. В верхней строке экранной клавиатуры отображаются предельные значения для выбранных параметров.

Параметры для бесконечной программы

Параметры	Определение
Прохождения программы	количество прогонов программы для бесконечной программы
Пауза между программами	промежуток времени между завершением программы и следующим за ним запуском программы
Задержка дверцы	промежуток времени между завершением программы и открытием дверцы автомата для мойки
Дверца открыта для	промежуток времени между открытием и закрытием дверцы автомата для мойки
Выбор дверцы	выбор дверцы автомата для мойки, которая открывается после прохождения программы

- Введите необходимые значения для каждого параметра.
- Нажмите кнопку **start** в нижней строке для запуска циклической программы.

На дисплее отображается сообщение Циклическая программа: Циклическая программа: Внимание! Открывание и закрывание дверцы осуществляется автоматически.. Нажатием **OK** запускается бесконечная программа, нажатием **↶** процесс прерывается. После запуска программа обработки повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто установленное количество прогонов программы.

Бесконечную программу можно прервать в любой момент нажатием кнопки **Stop**.

Заполнение дозирующей системы

Функция Наполнить систему дозирования используется для удаления воздуха из соответствующей системы дозирования. После заполнения контейнера химическими средствами процессов или замены его на заполненный контейнер необходимо выполнить функцию.

Функция выполняется только в том случае, если в моечной камере не находится загрузочное устройство.

- Нажмите кнопку Наполнить систему дозирования.
- Нажмите кнопку требуемой системы дозирования, например **DOS 1**.

Во время процесса на дисплее будут отображаться отдельные этапы. После завершения процесса на дисплее отобразится сообщение:

Система дозирования **DOS 1** заполнена.

Системные настройки

или

Система дозирования DOS 1 не заполнена. Повторите Наполнить систему дозирования..

- Подтвердите сообщение кнопкой **ОК**.

Если заполнение системы дозирования снова прошло неудачно, обратитесь в сервисную службу.

Настройка системы дозирования

Настройка системы дозирования используется для юстировки систем дозирования. Она должна выполняться в следующих случаях:

- подключённые химические средства были заменены (изменение вязкости)
- был установлен новый дозирующий насос или датчик расхода
- необходимо проверить систему дозирования, например, для квалификации, повторной квалификации или периодической проверки

Во время настройки дозирующий насос управляется определённым количеством импульсов. Вместе с этим система управления считает импульсы, поданные датчиком расхода. После указания измеренного объёма система управления рассчитывает подлежащие перерасчёту коэффициенты производительности дозирующего насоса в мкл/импульс и скорость импульса датчика расхода в мкл/импульс.

Выполнение настройки

Настройка для системы дозирования может выполняться, только если в моечной камере не находится загрузочное устройство.

Для определения точной производительности дозирующего насоса и скорости импульса датчика расхода требуются 2 измерительных цилиндра:

- 1 x 1000 мл
- 1 x 100 мл
- Установите всасывающую трубку системы дозирования в измерительный цилиндр 500–1000 мл.
- Заполните измерительный цилиндр дозируемым химическим средством.
- Заполните цилиндр 100 мл дозируемого химического средства.

Перед выполнением настройки системы дозирования необходимо удалить воздух из систем дозирования.

- Нажмите кнопку Наполнить систему дозирования.
- Нажмите кнопку требуемой системы дозирования, например DOS 1.

После завершения процесса:

- Подтвердите сообщение кнопкой **ОК**.
- Заполните измерительный цилиндр объёмом 500–1000 мл дозируемым химическим средством из измерительного цилиндра 100 мл и отметьте или отмаркируйте уровень заполнения.
- Полностью наполните измерительный цилиндр объёмом 100 мл дозируемым химическим средством.
- Нажмите кнопку Настройка системы дозирования.
- Нажмите кнопку требуемой системы дозирования, например DOS 1.

На дисплее отображается следующее сообщение:

Установка для системы дозирования ... запущена. Подготовьте систему дозирования.

- Подтвердите сообщение на дисплее кнопкой **ОК**.

Проводится измерение дозируемого количества.

На дисплее отображаются этапы процесса, например Дозирующий насос активен.

После завершения измерения откроется экранная клавиатура.

Отобразится предыдущее установленное значение.

- Заполните измерительный цилиндр объёмом 500–1000 мл химическим средством до исходного уровня заполнения из измерительного цилиндра 100 мл .
- Считайте требуемый для заполнения объём на измерительном цилиндре 100 мл.
- Введите полученное значение с помощью экранной клавиатуры и подтвердите нажатием **ОК**.

Отображаются результаты измерений для пересчётных коэффициентов, например:

пересчётный коэффициент DOS 1:

старый ... мкл/импульс новый ... мкл/импульс

пересчётный коэффициент датчика расхода 1:

старый ... мкл/импульс новый ... мкл/импульс

Принять новые значения?

При нажатии **ОК** в системе управления сохраняются новые пересчётные коэффициенты, при нажатии \leftarrow сохраняются старые пересчётные коэффициенты. На дисплее снова отображается меню Настройка системы дозирования.

Поручите сервисной службе выполнить Настройка системы дозирования, если системы дозирования автомата для мойки не оснащены всасывающими трубками.

Системные настройки

Регулировка модуля измерения проводимости

Для очень высоких требований к результату очистки и ополаскивания, например, в химической аналитике, модуль измерения проводимости можно регулировать с помощью функции Устан. мод. измер. электропров. воды. Измерительная система регулируется в диапазоне измерения проводимости от полностью обессоленной до холодной воды.

Регулировка модуля измерения проводимости выполняется в случае, если в моечной камере не находится загрузочное устройство.

Моечная камера должна ополаскиваться полностью обессоленной водой для предотвращения слишком высоких значений измерения вследствие занесения щелочей.

- Нажмите кнопку Устан. мод. измер. электропров. воды.

Выполняется измерение для полностью обессоленной воды. На дисплее отображаются сообщение Пожалуйста, подождите... и текущий этап процесса, например Измерение активно. После завершения измерения Факт. электропровод. обессол. воды отображается с маской ввода для полученного вручную значения.

Дверца на стороне загрузки разблокируется для измерения вручную.

- Откройте дверцу и выполните измерение проводимости вручную.
- Закройте дверцу.
- Нажмите кнопку рядом с параметром Замер. электропров. обессол. воды, чтобы открыть экранную клавиатуру.
- Введите измеренное значение с помощью экранной клавиатуры и подтвердите нажатием **ОК**.

Измеренные значения с цифрами после запятой необходимо округлить.

- Нажмите кнопку **ОК**.

Будет выполнено измерение для холодной воды.

- Выполните действия, как для полностью обессоленной воды, когда появится сообщение Факт. электропровод. холодной воды.

Введённые значения для Проводимость ... Новая сохраняются в системе управления.

На дисплее снова отображаются Функции машины.

Регулировку модуля измерения проводимости можно прервать нажатием кнопки Stop в нижней строке. На дисплее отображается сообщение Установка модуля измерения электропроводимости воды не выполнена. Пожалуйста, повторите..

Выполнить проверку программы


Заново созданные или изменённые программы обработки можно проверить с помощью Программный тест. Только если программа обработки проходит Программный тест без ошибок, разрешается разблокировка с параметром Проверено (см. руководство по программированию, глава «Управление программой»).

Программный тест можно использовать для проверки эффективности очистки. Во время проверки программа останавливается после каждого программного блока, дверцу на стороне загрузки можно открыть для взятия пробы.

Если необходимо открыть дверцу между двумя программными блоками учитывайте следующие источники опасности:

- опасность получения ожогов или ошпаривания после программных блоков с высокой температурой
- опасность химического ожога после программных блоков с дозированием химических средств
- вдыхание токсичных паров после программных блоков с применением дезинфицирующих средств

Выступающий пар после программных блоков с высокой температурой может привести к ложному срабатыванию сигнализатора дыма.

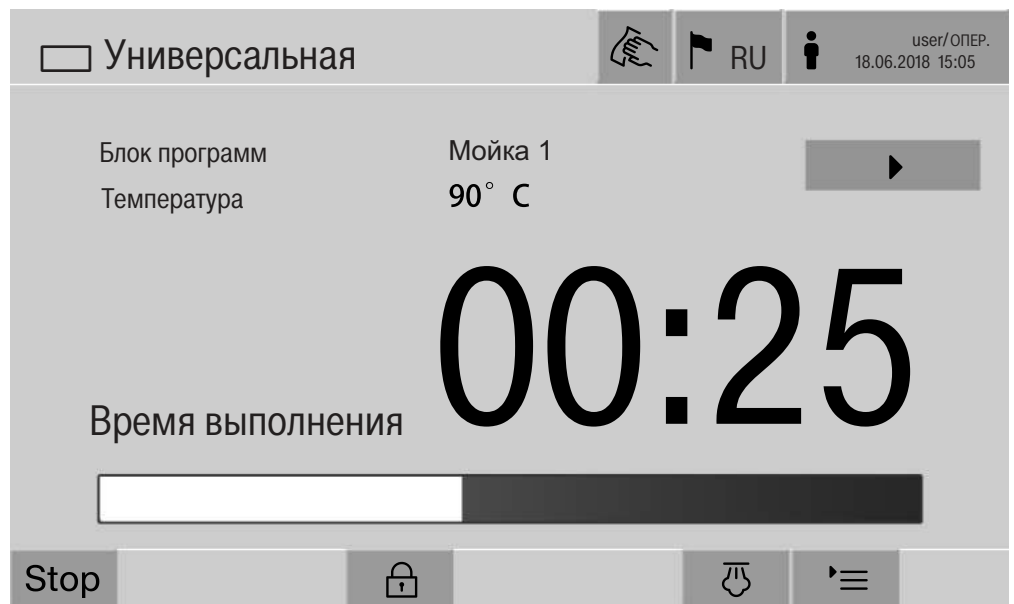

После запуска программ обработки на дисплее рядом с программным блоком отображается дополнительная кнопка ►. Кнопка ► имеет две функции:

- продолжение программы обработки без открытия дверцы
- пропуск следующего программного блока

Пример взятия пробы

- Нажмите кнопку Программный тест.

На дисплее отображаются доступные для выбора загрузочные устройства.

Системные настройки

- Нажмите кнопку требуемого загрузочного устройства.

На дисплее отображаются доступные для выбора программы обработки.

- Нажмите кнопку требуемой программы обработки.

На дисплее отображается следующее сообщение:

Программный тест: можно пропустить блок программ с помощью ►. Дверца может открываться в конце каждого программного блока.

- Подтвердите сообщение кнопкой **ОК**.

Отобразится индикатор запуска программы.

- Нажмите кнопку Start.

Кнопка ► отображается, программа обработки запускается с задержкой.

Перед подачей воды с помощью кнопки ► можно пропустить отображаемые программные блоки.

После каждого программного блока перед откачиванием моющего раствора отображается следующее сообщение:

Программный тест: дверцу можно открыть для отбора образцов.

- Подтвердите сообщение кнопкой **ОК**.

Кнопки ◀► и ► разблокированы.

- Для взятия пробы нажмите кнопку ◀►, чтобы открыть дверцу.

- После взятия пробы нажмите кнопку ►◀, чтобы закрыть дверцу.

На дисплее отображается следующее сообщение:

Программный тест должен быть продолжен? Для продолжения программного теста нажмите ОК. Для повторного открытия дверцы нажмите ↶.

- Подтвердите сообщение кнопкой **ОК**.

Моющий раствор откачивается, начинается следующий программный блок.

Если после программного блока не нужно брать пробу:

- Нажмите кнопку ►.

Моющий раствор откачивается, начинается следующий программный блок.

Каждый программный блок можно пропустить вначале нажатием кнопки ►.

Выполнение перезапуска

С помощью функции Перезапуск система управления автомата для мойки отключается и запускается заново. Функцию Перезапуск можно использовать, например, если устранение ошибок содержит требование Выключить и снова включить машину..

■ Нажмите кнопку Перезапуск.

На дисплее отображается запрос подтверждения Выполнить перезапуск?. При нажатии **ОК** будет выполнен перезапуск, ↵ отменяет перезапуск.

Для стабильной длительной эксплуатации рекомендуется перезапускать автомат для мойки каждые 24 часа. Перезапуск можно выполнить с помощью этой функции. Кроме того, перезапуск автомата для мойки можно выполнить в веб-интерфейсе с помощью функции ⚙ Система/Конфигурация прибора/Автомат. перезапуск автоматически или в ⚙ Система/Функции машины/Перезапуск машины вручную.

Вызов типовой таблички

В меню Типовая табличка перечислена следующая информация:

- Тип прибора
- Название прибора
- Дата ввода в эксплуатацию
- Серийный номер
- Заводской индекс
- Тип прибора
- Материальный номер
- Версия ПО

Наряду с параметром Название прибора можно указать специальное имя для автомата для мойки.

■ Нажмите кнопку рядом с параметром Название прибора.

На дисплее отобразится экранная клавиатура для ввода имени машины.


■ Введите имя для автомата для мойки и подтвердите нажатием **ОК**.

Введённое имя машины используется:

- в веб-интерфейсе
- в протоколах обработки
- в протоколах ошибок
- в документации процессов, передаваемой в программное обеспечение

Управление персональными программами

В меню Управл. персональн. программами можно установить 4 наиболее часто используемые программы обработки в качестве персональных программ.


Если Автом. упорядочивание программ не активировано: после нажатия кнопки  Обработка отображаются все присвоенные загрузочному устройству программы обработки.

Если выбор программы обработки выполняется с помощью кнопки ☆ Персон. программы, отображаются только 4 программы обработки, созданные в меню Управл. персональн. программами. Если загрузочному устройству не присвоена ни одна из 4 избранных программ обработки, отображается следующее сообщение: Нет персональн. программ для загрузочн. тележки.

Для определения персональных программ:

- Нажмите кнопку Управл. персональн. программами.

На дисплее отобразятся 4 кнопки для избранных программ.

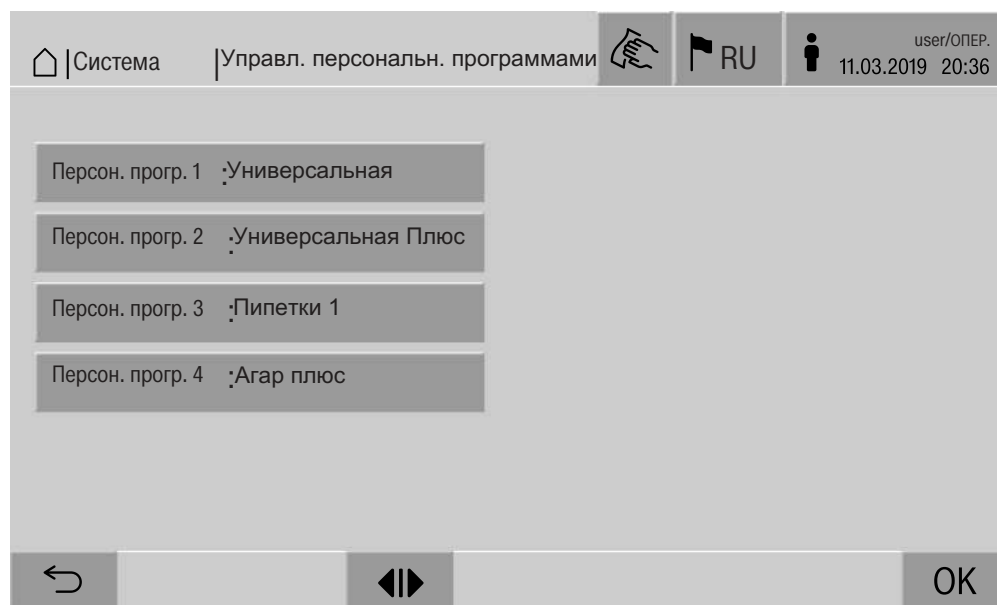

- Нажмите кнопку Персон. прогр. 1.

Отобразится список программ обработки.

- Нажмите кнопку требуемой программы обработки, в данном примере Универсальная.

Имя программы обработки отображается на кнопке Персон. прогр. 1.

Аналогичным образом определите 2–4 избранные программы.

- Выйдите из меню нажатием **OK**.

Техобслуживание

Периодическое техобслуживание этих автоматов для мойки и дезинфекции должно проводиться сервисной службой Miele **после 2000 часов эксплуатации или минимум один раз в год.**

Техобслуживание включает в себя следующие пункты:

- электрическая безопасность по VDE 0701/0702
- механизм дверцы и уплотнение дверцы
- резьбовые соединения и подключения в моечной камере
- система залива и слива воды
- внутренние и внешние системы дозирования
- распылительные коромысла
- Комбинация фильтров
- резервуар-сборник со сливным насосом и сливным клапаном
- все тележки, модули и вставки (от отдельного перерасчёта)

при наличии:

- пароконденсатор,
- сушильный агрегат,
- Измерение проводимости
- подключенный принтер.
- подключение к сети

Внешнее программное обеспечение для документации и компьютерные сети не проверяются сервисной службой Miele.

В рамках техобслуживания проводится функциональная проверка по следующим пунктам:

- ход выполнения программы в качестве пробного пуска с термоэлектрическим измерением
- проверка герметичности
- все важные с точки зрения безопасности системы измерения (индикация при неисправностях)
- устройства обеспечения безопасности

Текущие проверки

Ежедневно перед началом работы пользователь должен проводить регулярные проверки. Для регулярных проверок завод предоставляет шаблон для соответствующего контрольного списка.

Необходимо проверять следующие пункты:


- фильтры в моечной камере
- распылительные коромысла машины и распылительные коромысла тележек, модулей и корзин
- моечная камера и уплотнение дверцы
- дозирующие системы
- тележки, корзины, модули и вставки
- фильтры в загрузочных устройствах

Очистка фильтров в моечной камере


Фильтры в полу моечной камеры предотвращают попадание крупных частиц грязи в систему циркуляции. Фильтры могут засоряться частицами загрязнений. Поэтому фильтры должны ежедневно проверяться и при необходимости очищаться.

⚠ Повреждения вследствие засорённых водных путей.
Без использования фильтров частицы загрязнений попадают в водяной контур автомата для мойки. Частицы загрязнений могут забивать форсунки и клапаны.
Запускайте программу, только если установлены фильтры.
Если фильтры устанавливаются после очистки, убедитесь в их правильном креплении.


- Удалите крупные частицы загрязнений с поверхности фильтра.

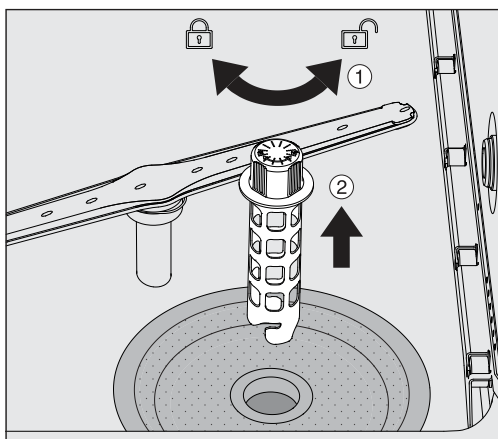

- Поверните крепление влево, чтобы ослабить его ① и извлечь из фильтра грубой очистки ②.
- Промойте крепление под проточной водой, уделите особое внимание перфорации в верхней части.

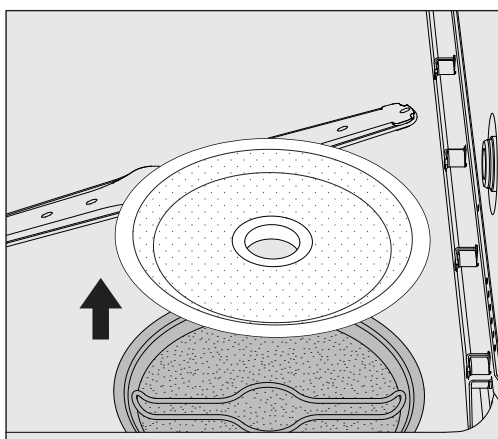

- Снимите фильтр грубой очистки и промойте под проточной водой.

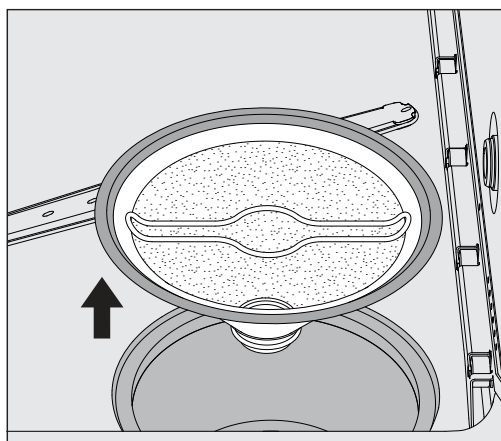

- Снимите фильтр тонкой очистки.
- Удалите отложения и загрязнения под проточной водой, при необходимости воспользуйтесь щёткой.
- Продуйте фильтр тонкой очистки сжатым воздухом против направления потока моющего раствора.
- Снова установите фильтр тонкой очистки в резервуар-сборник.
- Установите фильтр грубой очистки на фильтр тонкой очистки.
- Установите крепление через отверстие в фильтре грубой очистки и поверните вправо.

Очистка распылительных коромысел

Сопла распылительных коромысел могут засориться. Поэтому распылительные коромысла необходимо ежедневно проверять.

Маркировка распылительных коромысел автомата для мойки, некоторых тележек и модулей:

- M1 = нижнее распылительное коромысло машины
- M2 = верхнее распылительное коромысло машины
- A1 = распылительные коромысла тележки А 501, А 504
- A2 = распылительное коромысло модуля А 603


Обращайте внимание на маркировку распылительных коромысел, если вы повторно устанавливаете их в автоматы для мойки, тележки и модули.

- Вдавите внутрь распылительного коромысла видимые загрязнения с помощью острого предмета, хорошо промойте под проточной водой.

Снимайте распылительные коромысла следующим образом:

Распылительные коромысла автомата для мойки

- Извлеките тележку из моечной камеры .

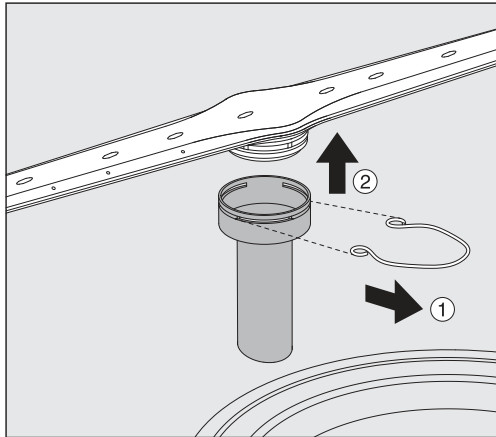

- Освободите крепёжные зажимы на направляющей коромысла, снимите нижнее коромысло по направлению вверх, а верхнее коромысло по направлению вниз.

Распылительные коромысла на тележках и модулях

- Освободите крепёжные зажимы на направляющей коромысла и снимите коромысло по направлению вниз.

Если на подшипнике распылительного коромысла видны следы износа, вызывающие нарушение работоспособности, обратитесь в сервисную службу Miele.

- После очистки снова установите распылительные коромысла и зафиксируйте зажимами. Обратите внимание на правильную посадку зажимов.

После установки проверьте свободный ход коромысел.

⚠ Неудовлетворительный результат очистки за счёт неправильно измеренной скорости вращения распылительных коромысел.

На концах распылительного коромысла имеются сильные магниты. Если к этим магнитам пристают металлические предметы, скорость вращения коромысла может измеряться неправильно.

Удалите с магнитов все металлические предметы, например части инструментов.


Чистка автомата для мойки

Блокировка дисплея

Дисплей автомата для мойки можно заблокировать для очистки и дезинфекции.

- Нажмите кнопку  в верхней строке дисплея.

На дисплее отобразится следующее:

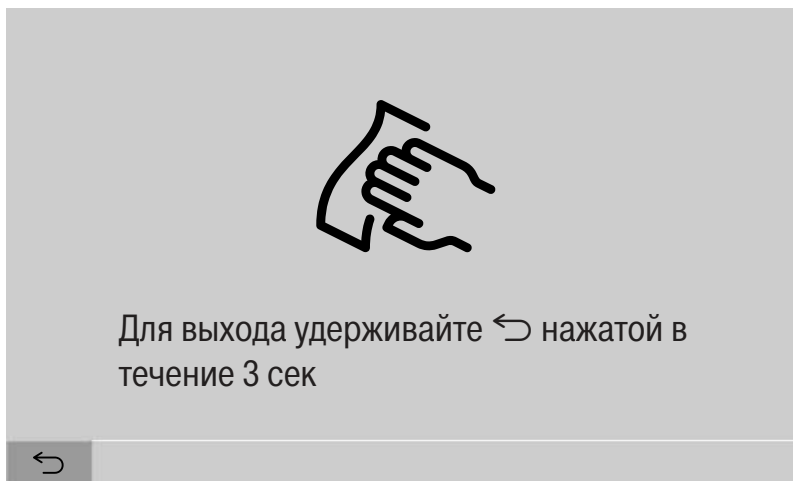

- Для разблокировки дисплея автомата для мойки удерживайте кнопку ↵ нажатой в течение 3 секунд.

Очистка элементов управления и стеклянной дверцы


- Для очистки стеклянной дверцы и дисплея используйте только влажную салфетку или обычный стеклоочиститель.

Не применяйте абразивные средства и универсальные очистители!
Из-за своего химического состава они могут сильно повредить стеклянную поверхность.

Очистка передней части прибора

- Очищайте переднюю часть из нержавеющей стали только влажной салфеткой и средством для очистки и дезинфекции или неабразивным очистителем для нержавеющей стали.
- Для предотвращения быстрого загрязнения панели, например, следами от пальцев, в конце чистки можно использовать средство для ухода за нержавеющей сталью.

Запрещается использовать очистители, содержащие нашатырь, а также нитрорастворители и синтетические растворители!
Эти средства могут повреждать поверхность.

 Опасность возгорания вследствие попадания воды.
Из-за сильного давления струи вода может попасть в автомат для мойки.
Не направляйте воду на автомат для мойки и окружающую его зону, например, водяным шлангом или очистителем высокого давления.

Очистка моечной камеры

Моечная камера самоочищается преимущественно в процессе работы.

- Если все же образовались отложения, обратитесь в сервисную службу Miele.

Очистка дверного уплотнения

- Регулярно протирайте дверное уплотнение влажной салфеткой, чтобы удалять загрязнения.

Поврежденные или негерметичные уплотнения дверцы должны быть заменены сервисной службой Miele.

Проверка тележек, модулей и вставок

Для обеспечения работоспособности тележек, модулей и вставок их необходимо ежедневно проверять. Контрольный список предлагается к автомату для мойки.

Необходимо проверять следующие пункты:


- Находятся ли направляющие шины в безупречном состоянии и прочно ли соединены с тележкой?
- Крепко ли завинчены контргайки направляющих шин?
- Имеются ли в тележке модульной системы заглушки в соединениях модулей?
- Прочно ли соединены с тележкой или вставкой инжекторные сопла, промывочные сопла и адаптеры шлангов?
- Свободны ли инжекторные сопла, промывочные сопла и адаптеры шлангов для прохождения через них моющего раствора?
- Плотны ли сидят заглушки и крышки на промывочных соплах?

При наличии распылительных коромысел:

- Распылительные коромысла свободно вращаются?
- Сопла распылительных коромысел не засорены (см. главу «Меры по техобслуживанию, очистка распылительных коромысел»)?
- На концах распылительных коромысел имеются магниты?
- К магнитам на концах распылительных коромысел не пристали металлические предметы?

В рамках периодического техобслуживания автомата для мойки через 2000 часов эксплуатации или не реже одного раза в год необходимо выполнять техобслуживание тележек, модулей и вставок, см. главу «Меры по техобслуживанию/Техобслуживание».

Встроенный принтер (опция)

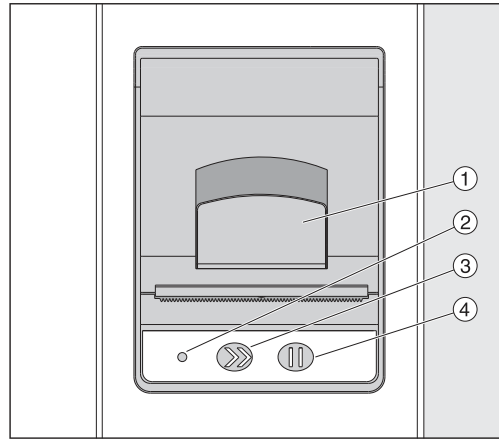

- ① Рычаг для открытия крышки
- ② Светодиод
- ③ Подача бумаги
- ④ Кнопка подтверждения

Светодиод со- стояния	Статус принтера
выкл.	Ошибка в питающем напряжении
вкл.	готов к работе
1 мигание	не готов к работе
2 мигания	Ошибка головки принтера
3 мигания	Застревание бумаги/рулон бумаги пуст
4 мигания	Ошибка температуры

Замена рулона бумаги

Запрещается заменять рулон бумаги встроенного принтера во время работы программы.

Тройное мигание светодиода ② сообщает о том, что рулон бумаги закончился. Для замены рулона бумаги выполните следующие действия:

- Потяните рычаг ① на крышке принтера и откиньте крышку вверх.
- Извлеките пустой рулон бумаги из отделения принтера и вставьте новый.

Конец бумаги в рулоне находится на нижней стороне отделения.

- Слегка выдвиньте конец бумаги из отделения, закройте крышку принтера.
- Отсоедините выступающую полосу бумаги.
- Нажмите кнопку подтверждения ④.

Печать продолжится.

Содержание в исправности

Термобумага

У изготовителя автомата для мойки можно заказать запасные рулоны термобумаги шириной 60 мм и наружным диаметром приibl. 50 мм.

При надлежащем хранении при следующих условиях читаемость шрифта сохраняется в течение не менее 7 лет:

- предотвращение светового облучения
- постоянная температура воздуха в помещении от 18 °C до 25 °C
- относительная влажность воздуха не более 40–60 %

Срок службы термопечати уменьшается из-за следующих факторов:

- неисправная головка термопринтера
- неправильная настройка термопринтера, печать будет слишком бледной
- продолжительное воздействие температуры выше 40 °C
- хранение во влажном или сыром месте в течение длительного времени
- контакт со смягчителями, содержащимися, например, в плёнках из ПВХ
- контакт с маслами, жирами или спиртом
- контакт с агрессивными химикатами
- прямой солнечный свет

Неблагоприятные воздействия делают печать бледной. Текст станет нечитаемым, данные будут утеряны. Избегайте всех факторов, влияющих на срок службы термопечати. При необходимости делайте резервные копии на термостабильной бумаге.

Сообщения об ошибках на дисплее автомата для мойки помогут найти причины возникающих неисправностей и устранить их. Обязательно обратите внимание на следующее:


⚠ Ремонтные работы может проводить только сервисная служба Miele или авторизованный специалист.
В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть серьёзная опасность для пользователя.

Отображение ошибки на дисплее

Предупреждения ⚠ и ошибки ⊗ автомата для мойки отображаются в нижней строке дисплея. Символ является кнопкой для вызова списка со всеми сообщениями.

в главном меню

Если на дисплее отображается главное меню, сообщения показываются во всплывающем окне:

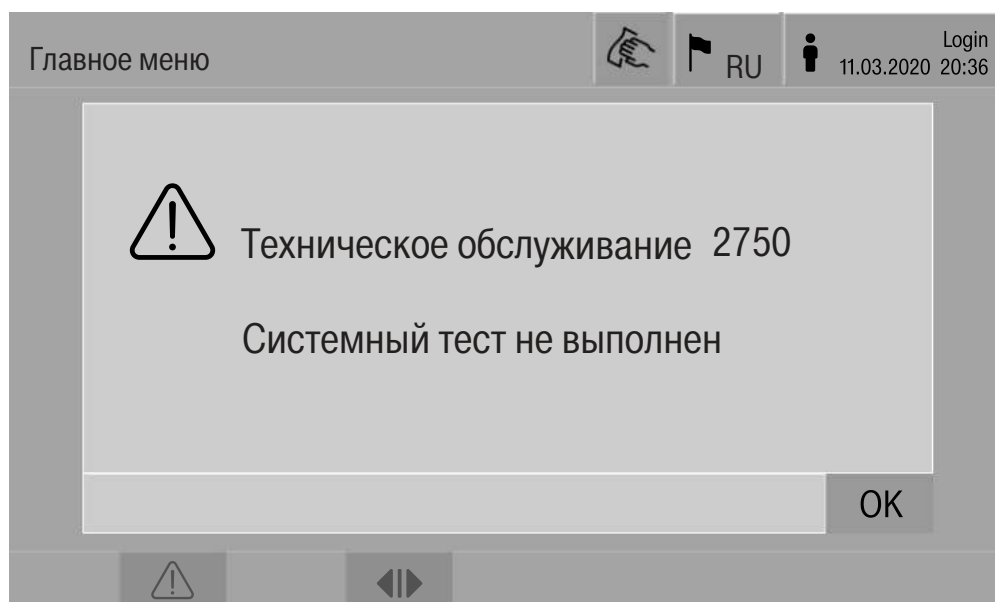

Если имеются сообщения для нескольких ошибок и предупреждений, для каждого открывается всплывающее окно. Всплывающие окна закрываются нажатием кнопки **OK**, сообщения сохраняются в списке активных сообщений.

Одна ошибка может возникать несколько раз. Например, если проверка системы не выполнялась в течение 3 дней, то будут появляться 3 всплывающих окна с соответствующим сообщением. Для закрытия окон необходимо 3 раза нажать **OK**.

во время выполнения программы

На индикаторе выполнения программы отображается текущее сообщение вместе с индикатором прогресса. Цвет индикатора прогресса изменяется в соответствии с типом сообщения:

- жёлтый – предупреждения ⚠
- красный – ошибки ⊗

Технические неполадки автомата для мойки

Список с активными сообщениями

Сообщения			RU	user/ ОПЕР. 18.06.2018 15:05	
	2650	Задержка по времени прижатия дверных уплотнений	28.01.2019	11:09	OK
	2478	Ошибка при контакте загрузочной тележки в моечной камере	28.01.2019	10:32	OK
	2841	Неизвестный ID пользователя	28.01.2019	10:11	OK
	2750	Системный тест не выполнен	28.01.2019	10:06	OK
	2687	Отключение при пиковой нагрузке ёмкости для обессоленной воды	28.01.2019	09:09	OK
	2651	Задержка по времени активирования герметизации дверцы	28.01.2019	09:09	OK

После нажатия на символ предупреждения или ошибки в главном меню на дисплее появится список со всеми активными сообщениями. Если в списке находится более 6 записей, над нижней строкой появится полоса прокрутки.


Перемещение по полосе прокрутки открывает следующую страницу списка.

В дополнение к коду ошибки отображаются дата и время её возникновения.

В правом столбце предупреждения и ошибки можно подтвердить нажатием **OK**. Кнопки активны только тогда, когда возможно квитирование.

Нажмите кнопку с сообщением в левом столбце, чтобы открыть описание кода ошибки с указанием по устранению ошибки.

Устранение неисправностей

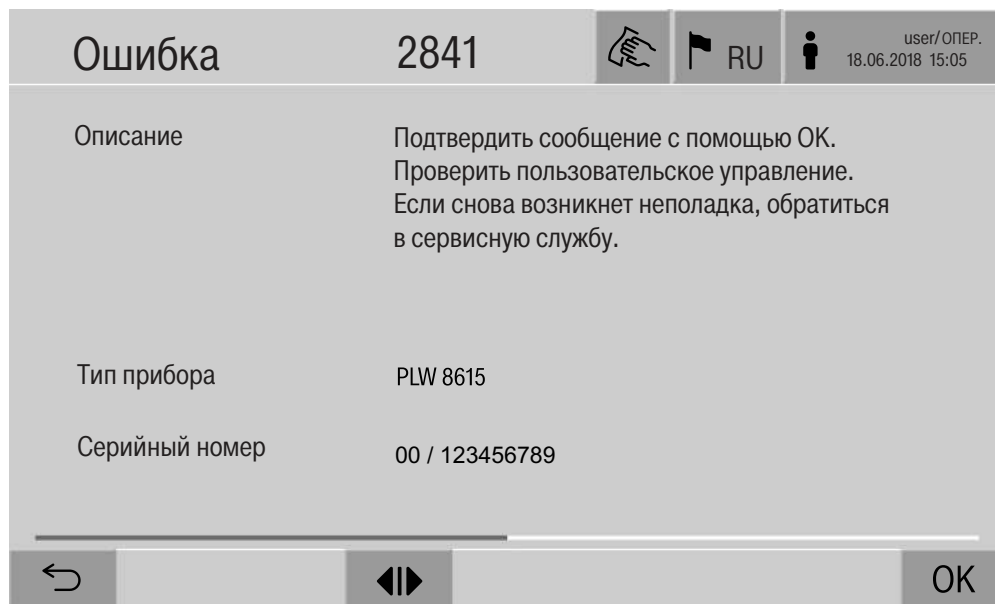

После нажатия на кнопку предупреждения или ошибки в списке с сообщениями на дисплее появится сообщение и указания по устранению ошибок.


Для подтверждения сообщения и выхода из меню нажмите **OK**.

Для выхода из меню без подтверждения сообщения нажмите ↶.

На дисплее снова отобразится список с сообщениями.

Технические неполадки без кода ошибок

Проблема	Причина и устранение
Дисплей автомата для мойки не горит.	На дисплее автомата для мойки не отображается информация. Эту неисправность может вызывать одна из следующих причин: – дисплей неисправен – соединительный кабель между дисплеем и системой управления повреждён – штекер повреждён ■ Свяжитесь с сервисной службой.
	Автомат для мойки не включается. ■ Нажмите на главный выключатель I.
	Включилось внешнее устройство дифференциального тока. ■ Проинформируйте инженерно-технического работника.
	Был активирован аварийный выключатель. ■ Проинформируйте инженерно-технического работника.
Моющий раствор в моечной камере автомата не откачивается после прерывания программы.	В заголовке программы обработки активирован параметр Слив воды после дезинфекции. ■ Проздезинфицируйте моющий раствор вручную и с помощью программы Дезинфекция вручную удалите его из моечной камеры (см. главу «Эксплуатация, прерывание программы с дезинфекцией вручную»).

 Ремонтные работы может проводить только сервисная служба Miele или авторизованный компанией специалист. В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть серьёзная опасность для пользователя.

Чтобы избежать необязательного обращения в сервисную службу при первом появлении сообщения об ошибке проверьте, не вызвана ли эта ошибка неправильной эксплуатацией.

Сообщения об ошибках отображаются на дисплее автомата для мойки.

Проинформируйте сервисную службу Miele, если неисправности не устраняются, несмотря на указания на дисплее автомата для мойки.

Сервисной службе необходимо сообщить номер модели и заводской номер автомата для мойки. Эти данные указаны на типовой табличке (см. главу «Электроподключение»).

⚠ Все работы, связанные с подключением к электросети, должны проводиться только квалифицированным электромонтажником, имеющим разрешение на проведение таких работ.

- Для подключения необходима стационарная электропроводка с заземлением согласно DIN VDE 0100.
- Подсоединение к сети электропитания посредством сетевой розетки осуществляется согласно местным правилам. После установки прибора розетка должна быть доступной. Тогда проверку электробезопасности, например, при ремонтных работах или при проведении техобслуживания прибора, можно будет проводить без излишних затруднений.
- При стационарном подключении главный выключатель следует установить с отключением от сети всех полюсов. Главный выключатель должен соответствовать номинальному току прибора, иметь межконтактный зазор минимум 3 мм, а также должна существовать возможность его блокировки в исходном положении.
- В случае необходимости прокладывается контур заземления.
- Значения для подключения указаны на типовой табличке и в прилагаемой схеме подключения.
- Направление вращения приводов двигателей зависит от электрического подключения прибора. При правильном подключении фаз двигателя вращаются вправо.
- Для повышения безопасности необходимо включать в цепь питания моечного автомата устройство дифференциального тока (УЗО) с током срабатывания 30 мА (по DIN VDE 0664).

Другие указания по электрическому подключению можно найти в прилагаемой схеме монтажа.

Прибор разрешается эксплуатировать только при напряжении и частоте в сети электропитания, а также номинале предохранителя, которые соответствуют указанным на **типовой табличке**.

Типовая табличка с соответствующей маркировкой находится на стороне загрузки автомата для мойки, рядом с сервисной крышкой.

Схема подключения прилагается к прибору.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Автомат для мойки был проверен на электромагнитную совместимость (ЭМС) согласно EN 61326-1 и подходит для эксплуатации в производственных целях, например в больницах, врачебных кабинетах и лабораториях, а также в областях, подключённых к общественной сети энергоснабжения.

Высокочастотное излучение автомата настолько низкое, что помехи электротехнических приборов в непосредственной близости рассматриваются как маловероятные.

Пол в месте установки предпочтительно должен быть выполнен из бетона, дерева или керамической плитки. При эксплуатации автомата для мойки на полу из синтетических материалов относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30 %, это позволит минимизировать вероятность электростатических разрядов.

Качество напряжения питания должно соответствовать типичным условиям больницы или промышленным условиям. Напряжение питания может отличаться от номинального максимум на $\pm 10\%$.

Подключение воды

⚠ Опасность для здоровья и риск повреждений из-за загрязнённой воды, поступающей в машину.

Качество поступающей воды должно соответствовать действующим в стране, где эксплуатируется прибор, нормам и требованиям к питьевой воде.

Обязательно руководствуйтесь прилагаемой схемой монтажа!

- Высокое содержание железа может привести к появлению ржавчины на обрабатываемом материале и в автомате для мойки.
- При содержании в свежей воде хлоридов свыше 100 мг/л сильно возрастает риск возникновения коррозионного налёта на обрабатываемом материале.
- В определённых регионах из-за специфического состава воды может появиться осадок. Это обуславливает эксплуатацию пароконденсатора только со смягчённой водой.

Технические характеристики

Высота	2495 мм
Ширина	900 мм
Глубина	990 мм
Полезные размеры моечной камеры: высота ширина глубина	675 мм 650 мм 800 мм
Вес (нетто)	450 кг
Максимальная нагрузка на пол	8 кН/м ²
Напряжение, общая потребляемая мощность, предохранитель	см. типовую табличку
Подключение сжатого воздуха: техническое	600–750 кПа
Подключение паропровода	250–1000/140–180 кПа/°C
Температура воды в точке подключения: Холодная вода/Пароконденсатор Горячая вода/Дистиллированная вода	макс. 20 °C макс. 65 °C
Давление подвода воды	макс. 200–1000 кПа избыточного давления
Эксплуатация: Температура в помещении Относительная влажность воздуха максимальная линейно спадающая до	5 °C–40 °C 80 % для температур до 31 °C 50 % для температур до 40 °C
Условия хранения и транспортировки: Температура в помещении Относительная влажность воздуха Атмосферное давление	-20 °C – +60 °C 10–85 % 500–1060 hPa
Высота над уровнем моря	до 1500 м
Степень защиты (согласно IEC 60529)	IP 20
Степень загрязнения (по IEC/EN 61010-1)	P2
Категория по перенапряжению (согласно IEC 60664)	II
Величина производимого шума в дБ (А), уровень звукового давления при мойке и сушке	< 70
Маркировка соответствия нормам	Защита от радиопомех, VDE (Союз немецких электротехников)
Маркировка СЕ	Директива ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EG
Адрес изготовителя	Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Gütersloh, Германия

Документы соответствия

Декларация о соответствии

ЕАЭС RU Д-DE.АЯ46.В.15693/20 с 01.04.2020 по 31.03.2025

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (а в настоящее время - Евразийского экономического союза ЕАЭС)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +40°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Условия гарантии

Гарантийный срок на прибор составляет 12 месяцев с даты проведения пуско-наладочных работ, но не более 18 месяцев с даты передачи оборудования покупателю по договору поставки/купли-продажи (далее – договор) с ООО Миле СНГ. В случае, если прибор приобретен не у ООО Миле СНГ гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты передачи прибора покупателю.

Надежная работа прибора гарантируется при условии соблюдения правил эксплуатации прибора и сервисного обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Сервисная служба ООО Миле СНГ или уполномоченный сервисный партнер ООО Миле СНГ оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях, если будет установлено, что неисправность не является следствием дефекта узла или детали, а также дефектом заводской сборки.

Отказ в гарантийном обслуживании возможен в случае, включая, но не ограничиваясь:

- Обнаружения механических повреждений прибора;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений прибора в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;

Гарантийные обязательства

- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими монтажным планам на прибор, инструкции по эксплуатации, данным на типовой табличке прибора, ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений прибора, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;
- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования прибора вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за прибором, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по регламентному техническому обслуживанию, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации или другой сопроводительной документации к оборудованию.

Указанные в настоящем разделе «Гарантийные обязательства» гарантийные условия применяются в части, не противоречащей договору между ООО Миле СНГ и покупателем. В случае, если в договоре поставки предусмотрено иное, условия договора имеют приоритетное значение над условиями, указанными в разделе «Гарантийные обязательства».

Гарантийные обязательства на прибор во всех случаях не действуют в отношении быстро изнашивающихся деталей и расходных материалов. К быстро изнашивающимся деталям относятся (указанный перечень не является исчерпывающим; окончательный перечень необходимо уточнять у импортера (ООО Миле СНГ):

1. Фильтры очистки воздуха сушильного агрегата
2. Крышки дозирующих насосов
3. Шланги дозирующих систем
4. Уплотнения периметра моечной камеры
5. Уплотнение двери

Система дозирования

1. Крышки дозирующих насосов
2. Шланги дозирующих систем

Система обессоливания воды

1. Смола

Система умягчения воды

Соль для регенерации

В список запасных частей, не подлежащих гарантии, входят также комплекты для проведения периодического технического обслуживания прибора, рекомендованные производителем и указанные в технической документации. Для каждого прибора материальный номер комплекта определяется по технической документации производителя в зависимости от модели, фабричного номера и даты выпуска.

Срок службы прибора

Срок службы прибора составляет 10 лет или достижения наработки 15 000 рабочих часов в зависимости от того, что наступило раньше.

Указанные нормативы обеспечиваются при условии эксплуатации приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также использования при ремонте оригинальных запасных частей и проведения пуско-наладочных работ и технического обслуживания специалистами сервисной службы ООО Миле СНГ или уполномоченным сервисным партнером ООО Миле СНГ.

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому никогда не выбрасывайте отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.



Используйте вместо этого специально оборудованное место для сбора и утилизации старых электрических и электронных приборов. Получите информацию об этом в администрации Вашего населенного пункта.

До момента отправления в утилизацию отслуживший прибор следует хранить в недоступном для детей месте.



Приложение

Приложение

Права пользователей в Главное меню

Действие	без регистрации	Автоматика	Оператор	Инженерно-технические работники	Администратор
Открытие и закрытие загрузочной дверцы	●	●	●	●	●
Открытие и закрытие разгрузочной дверцы после завершения программы в зависимости от настройки Подтверждение оконч. программы в веб-интерфейсе	●	●	●	●	●
Выбор вида нагрева: пар или электричество (см. главу «Описание прибора»)	●	●	●	●	●
Переключение языка текстовых сообщений	●	●	●	●	●
Закрытие всплывающих окон с сообщениями в зависимости от вида сообщения, предупреждения или сообщения об ошибке	●	●	●	●	●
Переключение окон в текущей программе (см. главу «Описание прибора»)	●	●	●	●	●
Выбор и запуск программы (см. главу «Эксплуатация»), в зависимости от настроек веб-интерфейсе в пункте «Управление программой»		●	●	●	●
Отмена программы (см. главу «Эксплуатация»)	●	●	●	●	●
Распечатка документации по процессу			●	●	●

Права пользователей в меню Система

Главное меню/Система		без регистрации	Автоматика	Оператор	Инженерно-технические работники	Администратор
Сетевое подключение	Изменить PIN		●	●	●	●
	Сопряжение				●	●
	Принтер				●	●
	Сеть				●	●
Функции машины	Самодезинфекция			●	●	●
	Цикличная программа					●
	Наполнить систему дозирования			●	●	●
	Настройка системы дозирования				●	●
	Устан. мод. измер. электропров. воды				●	●
	Программный тест					●
Перезапуск			●	●	●	
Типовая табличка				●	●	
Управл. персональн. программами					●	

Приложение

Уровни мощности программы/тележки/комбинации модулей

Тележка	Модули	Программы/уровни мощности
A 500	- A 603	Мини Стандартная Универсальная Интенсивная Органическая Неорганическая Масляные загрязнения Агар Пластик Дезинфекция 93/10
A 501		Мини Плюс Стандартная Плюс Универсальная Плюс Интенсивная Плюс Органическая Плюс Неорганическая Плюс Масляные загрязнения Плюс Агар плюс Пластик Плюс Дезинфекция 93/10 плюс
A 503	- 1–3 x A 605 Модули A 605 можно заменить, например, модулями A 620	Ампулы
A 503	- 4–6 x A 605 Модули A 605 можно заменить, например, модулями A 620	Ампулы Плюс
A 503	- 1 x A 613 Дополнительно не более 4 других модулей, например A 612	Пипетки 1
A 503	- 2 x A 613 Дополнительно не более 2 других модулей, например A 620	Пипетки 2
A 503	- 3 x A 613 Другие модули невозможны	Пипетки 3

Тележка	Модули	Программы/уровни мощности
А 503	1–3 модуля: - А 606 - А 612 - А 620 - А 621 - А 622 - А 623	Мини Стандартная Универсальная Интенсивная Органическая Неорганическая Масляные загрязнения Агар Пластик Дезинфекция 93/10
А 503	4–6 модулей: - А 606 - А 612 - А 620 - А 621 - А 622 - А 623	Мини Плюс Стандартная Плюс Универсальная Плюс Интенсивная Плюс Органическая Плюс Неорганическая Плюс Масляные загрязнения Плюс Агар плюс Пластик Плюс Дезинфекция 93/10 плюс
А 503	1–6 модулей:	Сушка
А 505 А 506 А 508 Е 900-4/2 Е 900-5/2 Е 935/2 Е 940 Е 950/1 Е 957 Е 975/2		Мини Плюс Стандартная Плюс Универсальная Плюс Интенсивная Плюс Органическая Плюс Неорганическая Плюс Масляные загрязнения Плюс Агар плюс Пластик Плюс Дезинфекция 93/10 плюс

Приложение

Тележка	Модули	Программы/уровни мощности
Е 941	- 1-4 Е 943/2 - 1-4 Е 944/2 - 1-2 Е 945/2 + 2 дополнительных модуля, Е 943/2 или Е 944/3	Мини Плюс Стандартная Плюс Универсальная Плюс Интенсивная Плюс Органическая Плюс Неорганическая Плюс Масляные загрязнения Плюс Агар плюс Пластик Плюс Дезинфекция 93/10 плюс
Е 941	- 1-4 Е 947/2	Ампулы Плюс

Если модули Е 942/3 должны использоваться для пипеток, обратитесь к Miele.

Сервисные программы

Тележка	Модули	Уровни мощности/ программа
Ноль	- без модулей	Опустошить ёмкость
все тележки	- без ограничения	Дезинфекция вручную

Оptionальное оснащение прибора

Оснащение	Стандартно	Варианты
Сливной клапан (AV)	X	
Электронагрев (EL)	X	
Измерение проводимости (CS)	X	
Контроль вращения распылительных коромысел (RS)	X	
Комбинированный бак (TH/RT)		X
Паровой/электрический нагрев переключается для моечной камеры и комбинированного бака дистиллированной воды для вторичного использования (если имеется) (EL/S)		X

Дополнительные опции:

1–4 дополнительные внутренние дозирующие системы (DS)

Сливной насос (DP)

Пароконденсатор (SC)*

Встроенный принтер для протоколирования параметров процесса (PR)

Сушильный агрегат (DU)

* только в сочетании с сушильным агрегатом

Miele

EAC