

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 20 мл, цилиндрическая, 16 × 150 мм, полистирол

Код изделия производителя: **5140**

Артикул поставщика: **11005657**

Описание

Пробирка 20 мл, цилиндрическая, без пробки, без делений. Изготовлена из устойчивого к механическим повреждениям, кристаллического полистирола высокой прозрачности. Нестерильна, упакована в пакете по 1000 штук. Не содержат латекс.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полистирол
Температурный диапазон	от -10°C до +70°C
Размеры, мм	Ø 16 × 150
Объём, мл	20,0
Номинальный объём, мл	20,0
Толщина, мм	1,10
Вес, гр.	8,1
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.
- Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 3000 g в течение 20 минут.

Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 55,6×43,5×36

Вес (кг): 10,20

Объем (м³): 0,087


Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности

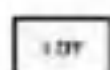

Номер серии



Одноразовое изделие



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам